



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2536V

**CS Prone Face Block 7" - Left & Right Intubation
(Compression Packed)**



CARE SURGICAL


Product Code: CSM2536V

CS Prone Face Block 7" - Left & Right Intubation Slot (Compression packed*)


*A long storage life of compressed packed products can comprise the product's integrity (e.g height and/or the rate in which the product fully inflates.)

⚠ Only to be used by trained clinicians.


The Prone Block offers support to your patient's forehead and cheeks. Ensure the eyebrows are visible to avoid direct pressure to the eyes.

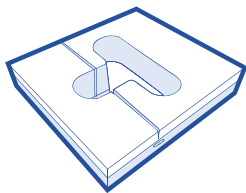


1 Remove from bag 1 hour before start of procedure**

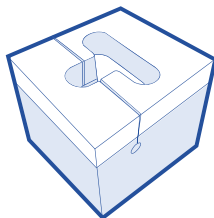


2 With patient supine, place cushion on their face***

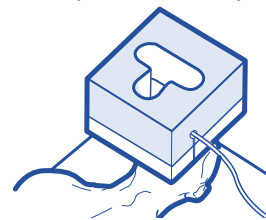

3 Feed the tubing up either slot & through the hole

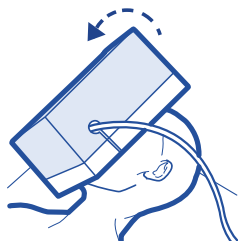

4 Turn patient to prone position

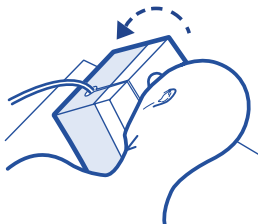

5 Once turned Ensure neutral neck line

****Allow a minimum of 1 hour for full inflation. During this time, gently stretch the foam by hand periodically to support full expansion.**

***** See overleaf for guidance on correct positioning**

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP

⚠ **DO NOT REUSE!** If reused injury to patient could occur due to issues with infection control and deterioration of the product.
⚠ **SAFE DISPOSAL:** customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
⚠ **DO NOT USE** products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 120732

The Forehead & Cheeks

Possible problems


- + Pressure ulcers
- + Facial edema

Possible causes

- + Inadequate blood supply due to prolonged excessive pressure
- + Shear, affecting the blood flow to the forehead or cheeks
- + Friction injury due to a period of continuous movement
- + Patient incorrectly positioned in the face support
- + High risk patient (includes the elderly, diabetics, smokers and those taking certain medications, eg steroids)

Reduce the risk

- + Ensure the patient's face is supported on the bony part of their cheeks, not the soft tissue
- + Ensure the patient's eyebrows are clearly visible
- + The face support must not encroach into the periorbital area above or below the eye
- + Recheck the head support after turning the patient and at least every 30 minutes throughout the procedure
- + It may be necessary to lift and replace the patient's face during long procedures or if there has been movement

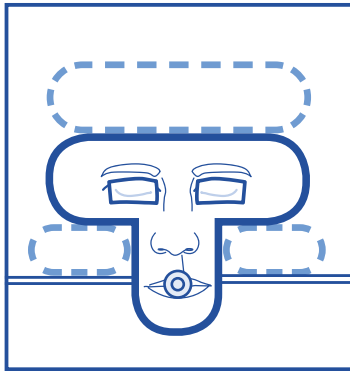

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



CARE SURGICAL


Artikelnummer: CSM2536V

CS Prone Face Block 7" - Left & Right Intubation Slot (Compression packed*)


*Eine lange Lagerzeit von komprimiert verpackten Produkten kann die Unversehrtheit des Produkts beeinträchtigen (z. B. die Höhe und/oder die Geschwindigkeit, mit der sich das Produkt vollständig entfaltet)

⚠ Nur für den Einsatz durch geschultes Personal geeignet.


Das Prone Block Kopflagerungskissen stützt die Stirn und die Wangen Ihres Patienten. Achten Sie darauf, dass die Augenbrauen sichtbar sind, um direkten Druck auf die Augen zu vermeiden.

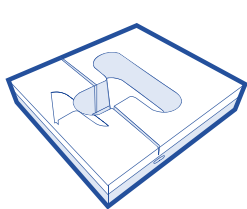

1 Entnehmen Sie das Kissen eine Stunde vor Beginn des Eingriffs aus der Verpackung.**

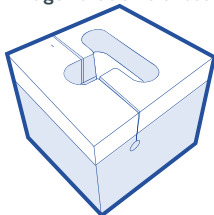


2 Legen Sie dem Patienten in Rückenlage das Kissen auf das Gesicht***

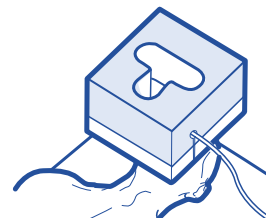

3 Führen Sie den Tubus sowohl durch den Schlitz, als auch durch die Öffnung an der Seite



4 Bringen Sie den Patienten in Bauchlage

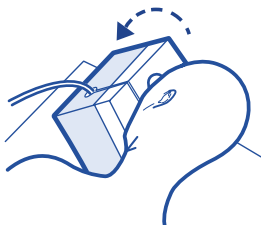

5 Anschließend sicherstellen, dass sich der Nacken in einer neutralen Position befindet

**Nehmen Sie es 1 Stunde vor Beginn des Eingriffs aus der Verpackung - während dieser Stunde muss der Schaumstoff des Polsters leicht mit der Hand auseinander gezogen werden (stellen Sie sicher, dass sich das Produkt vor der Verwendung vollständig entfaltet hat).

*** Hinweise zur korrekten Positionierung auf der Rückseite



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP

⚠ **Nicht wiederverwenden!** Bei Wiederverwendung kann es aufgrund von erschwerter Infektionskontrolle und der Alterung des Produkts zu Verletzungen des Patienten kommen.
⚠ **Sichere Entsorgung:** Kunden sollten alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur sicheren Entsorgung von Medizinprodukten einhalten.
⚠ **Verwenden Sie keine Produkte:** die beschädigt oder abgenutzt erscheinen. Im Falle einer Produktbeschädigung oder einer Verletzung des Patienten wenden Sie sich bitte an Care Surgical.



5 060624 120732

Stirn & Wangen


- + Dekubitus
- + Gesichtssödem

Mögliche Ursachen

- + Unzureichende Durchblutung aufgrund anhaltenden übermäßigen Drucks
- + Scherkräfte, die die Durchblutung der Stirn oder der Wangen beeinträchtigen
- + Reibungsverletzungen aufgrund längerer, kontinuierlicher Bewegung
Falsche Lagerung des Patienten im Kopflagerungskissen
- + Risikopatienten (dazu zählen ältere Menschen, Diabetiker, Raucher und Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen, z. B. Steroide)

Minimieren des Risikos

- + Achten Sie darauf, dass das Gesicht des Patienten auf dem knöchernen Teil der Wangen aufliegt, nicht auf dem Weichgewebe
- + Achten Sie darauf, dass die Augenbrauen des Patienten gut sichtbar sind
- + Das Kopflagerungskissen darf nicht in den periorbitalen Bereich oberhalb oder unterhalb des Auges hineinragen
- + Überprüfen Sie die Positionierung nach dem Drehen des Patienten und während des gesamten Eingriffs mindestens alle 30 Minuten
- + Bei langen Eingriffen oder bei Bewegungen des Patienten kann es erforderlich sein, das Gesicht des Patienten anzuheben und neu zu positionieren

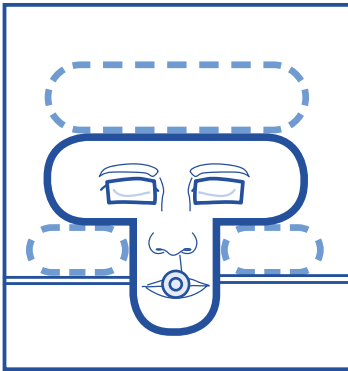

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning