



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2561

CS Prone Smart Head Support System (Helmet + Mirror)



CARE SURGICAL


Product Code: CSM2561

CS Prone Smart Head Support System (Helmet & Mirror)

*Suitable for patients 8 years+. Only to be used with the CS Absolute Prone Face Cushions

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

The CS Prone Smart Head Support System (Helmet and Mirror) used with compatible face cushion offers support to your patient's forehead and cheeks whilst ensuring a natural neckline and assisting with patient monitoring. Ensure the eyebrows are visible to avoid direct pressure to the eyes.

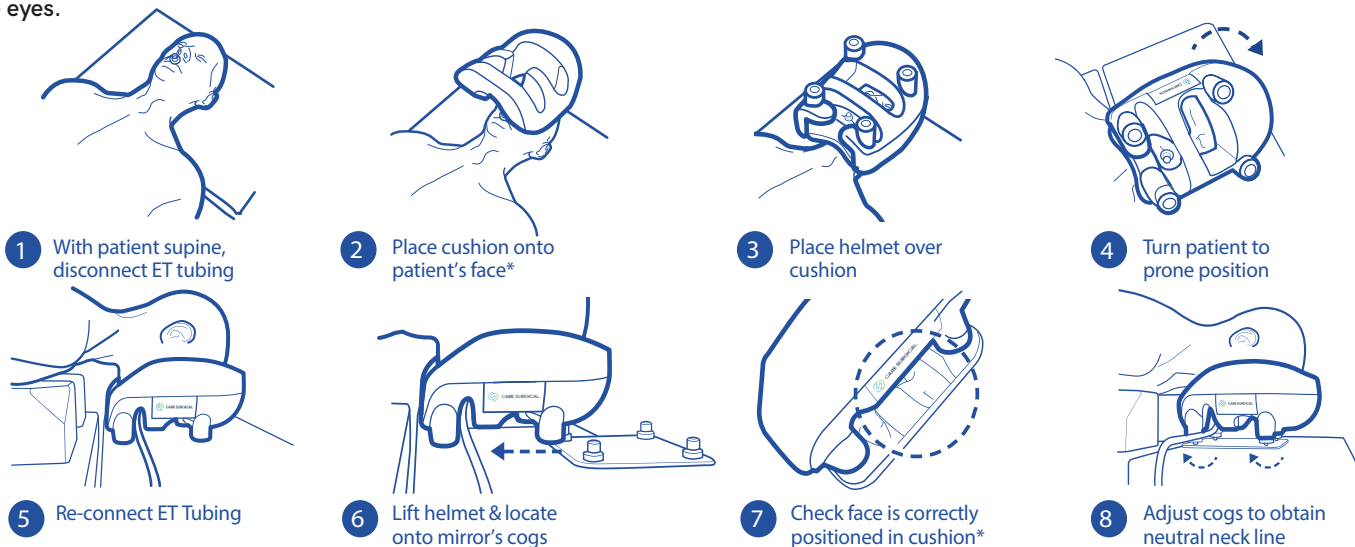

Warning: Do not remove cogs from mirror Ensure product is secure before positioning patient.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



EU REP




SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 123207

The Forehead & Cheeks

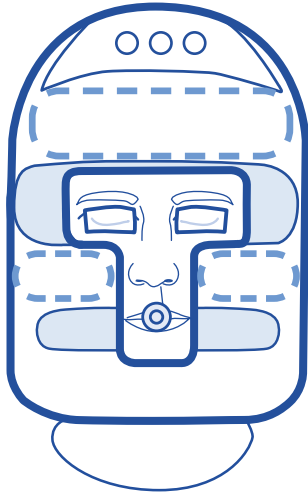

See the instructional video
at www.care-surgical.com

Possible problems

- + Pressure ulcers
- + Facial edema

Possible causes

- + Inadequate blood supply due to prolonged excessive pressure
- + Shear, affecting the blood flow to the forehead or cheeks
- + Friction injury due to a period of continuous movement
- + Patient incorrectly positioned in the face support
- + High risk patient (includes the elderly, diabetics, smokers and those taking certain medications, eg steroids)

Reduce the risk

- + Ensure the patient's face is supported on the bony part of their cheeks, not the soft tissue
- + Ensure the patient's eyebrows are clearly visible
- + The face support must not encroach into the periorbital area above or below the eye
- + Recheck the head support after turning the patient and at least every 30 minutes throughout the procedure
- + It may be necessary to lift and replace the patient's face during long procedures or if there has been movement



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland




CARE SURGICAL

Produktkode: CSM2561

CS Prone Smart Head Support System (Helmet & Mirror)

*Egnet til patienter 8 år+. Må kun bruges sammen med CS Absolute Prone Face Cushions


Brugt sammen med kompatibel ansigtspude giver CS Prone Smart Head Support System (Helmet & Mirror) støtte til din patients pande og kinder, samtidig med at det sikrer en neutral halsudskæring og hjælper med patientovervågning. Sørg for, at øjenbrynene er synlige for at undgå direkte tryk på øjnene.

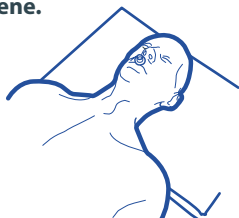


1 Med patienten i rygleje, frakobl ET-slangen




2 Placer puden på patientens ansigt*

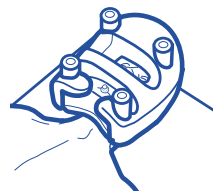


3 Placer hjelmen over puden**

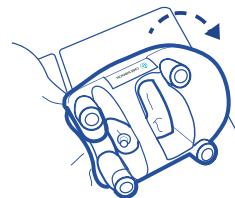


4 Drej patienten til bugleje

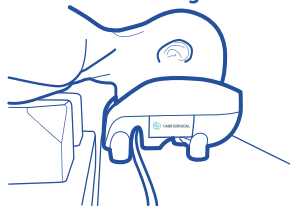


5 Tilslut igen ET-slangen

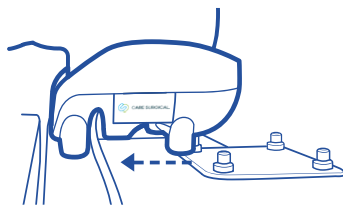

6 Løft hjelmen og find på spejlets takker

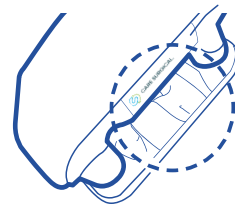

7 Kontroller at ansigtet er korrekt placeret i puden*

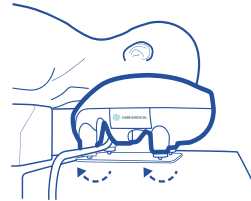

8 Juster takker for at opnå neutral halsudskæring

Må kun bruges af uddannede klinikere *Se næste side for vejledning om korrekt positionering. **Advarsel: Fjern ikke takker fra spejlet.**

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 XSP8 Ireland



Maks Patientvægt



SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr.




UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient kontaktes Care Surgical.



5 060624 123207

EU REP

Panden og kinderne

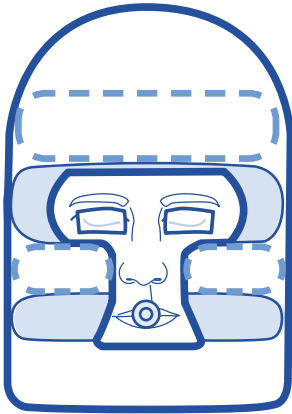

Se instruktionsvideoen på
www.care-surgical.com

Mulige problemer

- + Tryksår
- + Ødem i ansigtet


Mulige årsager

- + Utilstrækkelig blodforsyning på grund af langvarigt forhøjet tryk
- + Forskydning, der påvirker blodgennemstrømningen til panden eller kinderne
- + Friktionsskade på grund af en periode med kontinuerlig bevægelse
- + Patienten er ukorrekt placeret i ansigtsstøtten
- + Højrisikopatient (omfatter ældre, diabetikere, rygere og dem, der tager visse lægemidler, f.eks. steroider)

Reducer risikoen

- + Sørg for, at patientens ansigt støttes på knogledelen af kinderne, ikke det bløde væv
- + Sørg for, at patientens øjenbryn er tydeligt synlige
- + Ansigtsstøtten må ikke trænge ind i det periorbitale område over eller under øjet
- + Kontroller hovedstøtten igen efter at have vendt patienten og mindst hvert 30. minut under hele proceduren
- + Det kan være nødvendigt at løfte og udskifte patientens ansigt under lange procedurer, eller hvis der har været bevægelse


Rengøringsinstruktioner

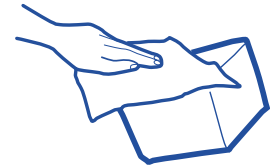

Rengør ved brug af standard
hospitalsservietter



Må ikke nedsænkes i
vand

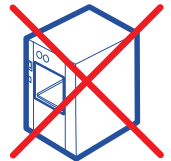

Autoklaver ikke



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP






CARE SURGICAL

Tuotekoodi: CSM2561

CS Prone Smart Head Support System (Helmet & Mirror)

*Soveltuu yli 8-vuotiaille potilaille. Käytetään vain CS Absolute Prone Face Cushion -kasvotyyntyjen kanssa


CS Prone Smart Head Support System (Helmet & Mirror) -päätukijärjestelmä käytettynä yhteensopivan kasvotyyntyn kanssa tukee potilaan otsaa ja poskia, varmistaa niskalinjan pysymisen neutraalina ja helpottaa potilaan seurantaa. Varmista, että kulmakarvat ovat näkyvissä, jotta silmiin ei aiheudu suoraa painetta.

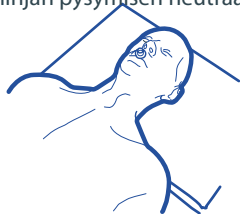


- 1 Irrota intubaatioputki, kun potilas on selinmakuulla.




- 2 Aseta tynny potilaan kasvoille.*

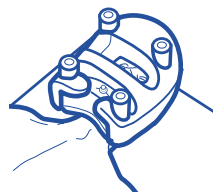


- 3 Aseta kypärä tynnyn päälle.**

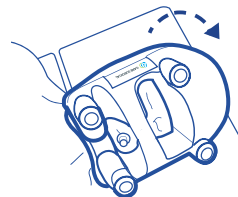

- 4 Käännä potilas päänmakuulle.

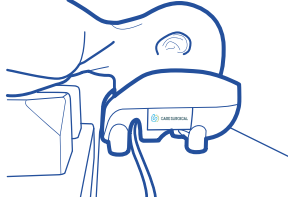


- 5 Liitä intubaatioputki uudelleen.

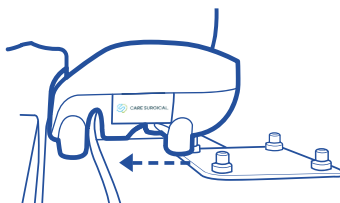

- 6 Nosta kypärää ja kohdista se peilin tappeihin.



- 7 Tarkista, että kasvot on asetettu oikein tynnylle.*

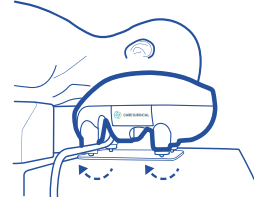

- 8 Sääda tappeja niin, että niskalinja on neutraali.

Vain koulutettujen lääkäreiden käyttöön. *Katso oikea asettelu kääntöpuolelta. Varoitus: Älä irrota tappeja peilistä.

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Potilaan enimmäispaino



ÄLÄ KÄYTÄ UUELLEEN! Uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa potilaan vamman infektiohallinnan ja tuotteen heikkenemisen seurauksena.



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.




ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneita tai kuluneita. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



5 060624 123207

EU REP

Otsa ja posket

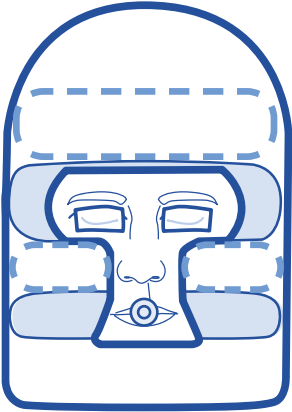

**Katso ohjevideo osoitteessa
www.care-surgical.com.**

Mahdolliset ongelmat

- + Painehaavat
- + Kasvojen turvotus


Mahdolliset syyt

- + Riittämätön verenvirtaus liiallisen pitkittyneen paineen seurauksena
- + Leikkausvoima, joka vaikuttaa veren virtaukseen otsaan tai poskiin
- + Hankausvamma jatkuvan liikkeen seurauksena
- + Potilaan virheellinen asettelu kasvotukeen
- + Suuren riskin potilaat (iäkkäät potilaat, diabeetikot, tupakoitsijat ja tiettyjen lääkkeiden, esim. steroidien, käyttäjät)


Riskin pienentäminen

- + Varmista, että potilaan kasvot ovat tuettuna poskien luiden kohdalta, ei pehmytkudoksen kohdalta.
- + Varmista, että potilaan kulmakarvat ovat selvästi näkyvissä.
- + Kasvotuki ei saa ulottua silmänympärysten tai silmänalusten alueelle.
- + Tarkista kasvotuki uudelleen potilaan kääntämisen jälkeen ja vähintään 30 minuutin välein toimenpiteen ajan.
- + Potilaan kasvoja saatetaan joutua nostamaan ja asettelemaan uudelleen pitkien toimenpiteiden aikana tai liikkeen jälkeen.

Puhdistusohjeet

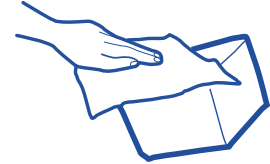

Puhdista tavanomaisilla
sairaalapyyhkeillä.

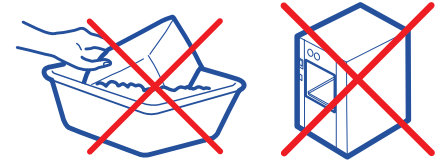

Älä upota veteen.

Älä steriloi autoklaavissa.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
Marlborough
MA 01752
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland





CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning