



CARE SURGICAL

Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2761

CS Blade Clamp - UK/EU




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2761


CS Blade Clamp - UK/EU

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.


Blade clamp compatible with UK and EU standard operating table rails on the market

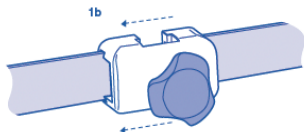

- 1 Slide the blade clamp onto the operating table rail onto the required position

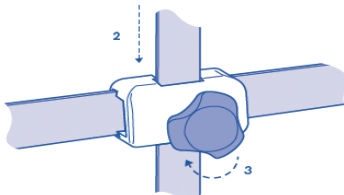

- 2 Insert the blade through the blade clamp until the attached accessory is in the required position

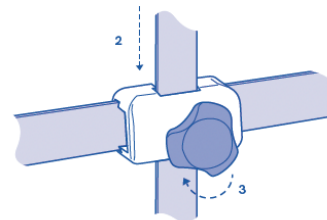

- 3 Turn the blade clamp handle clockwise to secure in place


Cleaning instructions:



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water

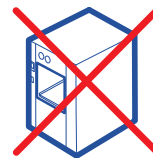

Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 123979

EU REP




CARE SURGICAL


Produktkode: CSM2761

CS Blade Clamp - UK/EU


Bladklemmen er kompatibel med operationsbordsskinner på markedet, der overholder UK og EU-standarder

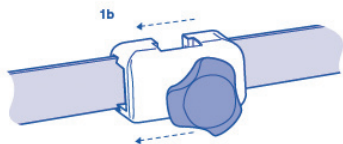

- 1** Skub bladklemmen på operationsbordsskinnen til den ønskede position

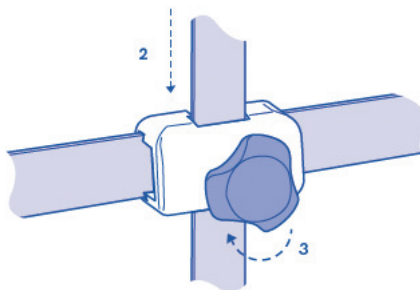

- 2** Indsæt bladet gennem bladklemmen, indtil det fastgjorte tilbehør er i den ønskede position

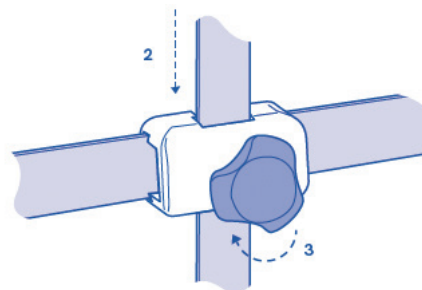

- 3** Drej bladklemmens håndtag med uret for at fastgøre det på plads

Sørg for, at produktet er sikkert, før du placerer patienten. Må kun bruges af uddannede klinikere.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Maks
Patientvægt



5 060624 123979



SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr.



UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient kontaktes Care Surgical.

EU REP




CARE SURGICAL


Tuotekoodi: CSM2761

CS Blade Clamp - UK/EU


Kielekekiinnike on yhteensopiva UK- ja EU-standardien mukaisten markkinoilla olevien pöytäkiskojen kanssa.

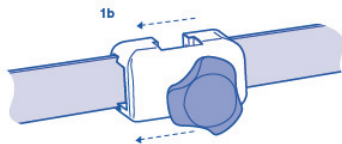

- 1** Työnnä kielekekiinnike leikkauspöydän kiskoon haluttuun kohtaan.

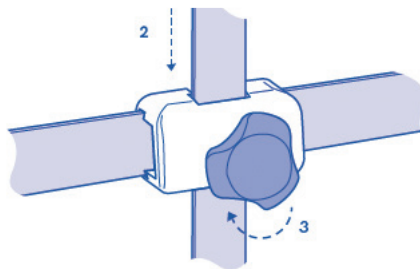

- 2** Työnnä kielekettä kielekekiinnikkeen läpi, kunnes liitetty lisälaitte on halutussa kohdassa.

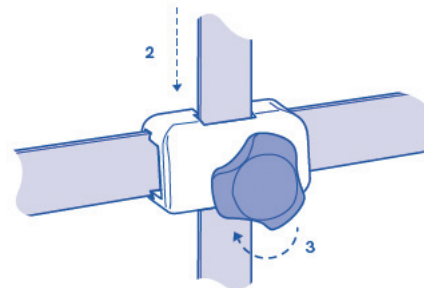

- 3** Kiristä järjestelmä paikalleen kääntämällä kielekekiinnikkeen kahvaa myötäpäivään.

Varmista, että laite on vakaa ennen potilaan asettelua. Vain koulutettujen klinikoiden käyttöön.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.



ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



5 060624 123979

EU REP




CARE SURGICAL


Κωδικός προϊόντος: CSM2761

CS Blade Clamp - UK/EU


Σφιγκτήρας με λεπίδα συμβατός με τις τυποποιημένες ράγες χειρουργικών τραπεζιών του UK και της EU που κυκλοφορούν στην αγορά

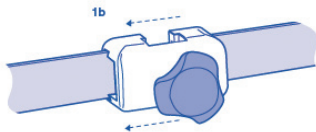

- 1 Σύρετε τον σφιγκτήρα με λεπίδα στη ράγα του χειρουργικού τραπεζιού στην απαιτούμενη θέση

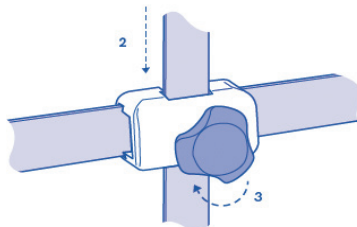

- 2 Τοποθετήστε τη λεπίδα μέσω του σφιγκτήρα με λεπίδα μέχρι το προσαρτημένο εξάρτημα να βρίσκεται στην απαιτούμενη θέση

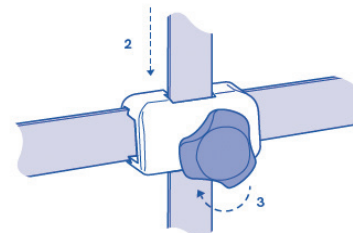

- 3 Στρέψτε τη λαβή του σφιγκτήρα με λεπίδα δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει ασφαλίσει στη θέση του πριν τοποθετήσετε τον ασθενή. Να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους ιατρούς.

Οδηγίες καθαρισμού:



Καθαρίζετε με τα συνήθη νοσοκομειακά μαντηλάκια



Να μη βυθίζεται σε νερό



Να μην καθαρίζεται σε αυτόκαυστο



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Μέγιστο βάρος ασθενούς



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ: οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ή φθορά. Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος ή τραυματισμού του ασθενούς, επικοινωνήστε με την Care Surgical.



5 060624 123979




CARE SURGICAL


Codice del prodotto: CSM2761

CS Blade Clamp - UK/EU


Morsetto per lama compatibile con le guide di tavoli operatori standard nel Regno Unito e nell'UE presenti sul mercato

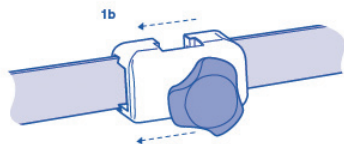

- 1** Far scorrere il morsetto della lama sulla guida del tavolo operatorio nella posizione desiderata

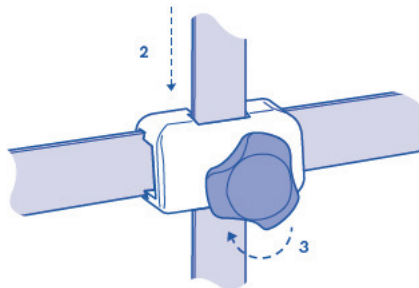

- 2** Inserire la lama attraverso il morsetto fino a quando l'accessorio collegato non si trova nella posizione desiderata

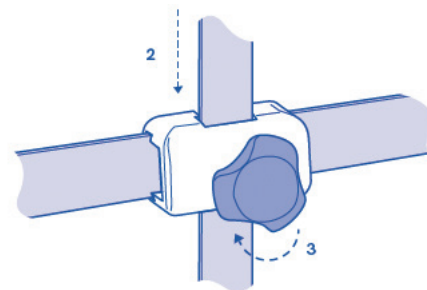

- 3** Ruotare la manopola in senso orario per serrarla in posizione

Assicurarsi che il prodotto sia fissato prima di posizionare il paziente. Da utilizzare solo da parte di medici qualificati.



Regno Unito: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Irlanda



SMALTIMENTO SICURO: i clienti devono attenersi alle leggi e alle normative locali in materia di smaltimento sicuro dei dispositivi medici.



NON UTILIZZARE prodotti che presentano segni di danneggiamento o usura. In caso di danni al prodotto o lesioni al paziente, contattare Care Surgical.



5 060624 123979





CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning