



CARE SURGICAL

Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2667

CS Head Stap Disposable




CARE SURGICAL

CS Head Strap Disposable

Product Code: CSM2667

⚠ Only to be used by trained clinicians.

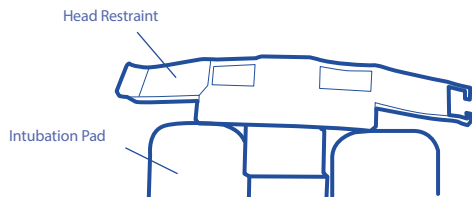

- 1 Place CSM2667 (Head Strap) on intubation pad



- 2 Intubate patient in position




- 3 Fold restraint over forehead



- 4 Centre chin strap on patient



- 5 Secure first strap over patient's head with Velcro

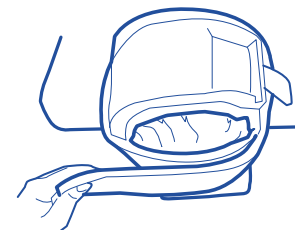

- 6 Secure second strap over patient's head with Velcro



⚠ DO NOT REUSE! if reused injury to patient could occur due to issues with infection control and deterioration of the product.
 ⚠ SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
 ⚠ DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
 In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 120992



UK: Care Surgical Ltd
 Unit 6 Ringtail Road,
 Burscough,
 L40 8JY
 Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
 43 Broad Street
 Suite B106, Hudson,
 MA 01749, USA
 Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
 Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP




CARE SURGICAL

Produktkode: CSM2667


CS Head Strap Disposable

Hovedstøtte

Intubationspude

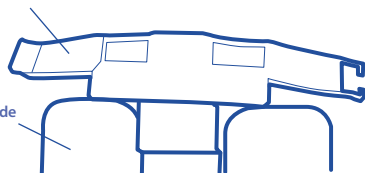


- 1 Placer CSM2667 (hovedrem) på intubationspuden

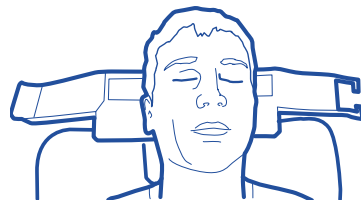

- 2 Intuber patienten i position




- 3 Fold støtten over panden

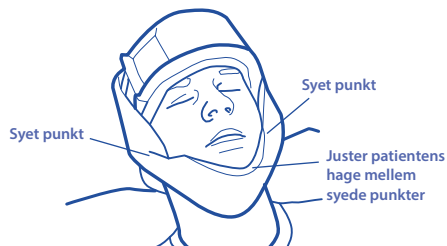

- 4 Centrér hageremmen på patienten



- 5 Fastgør den første rem over patientens hoved med Velcro®

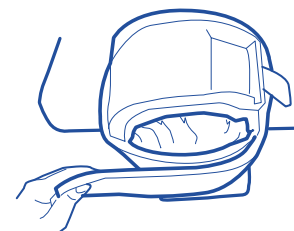

- 6 Fastgør den anden rem over patientens hoved med Velcro®



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Maks
Patientvægt



MÅ IKKE GENBRUGES! Ved genbrug kan patienten påføres skade som følge af problemer med infektionskontrol og forringelse af produktet.



SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr.



UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient kontaktes Care Surgical.




5 060624 120992




CARE SURGICAL

Tuotekoodi: CSM2667

CS Head Strap Disposable

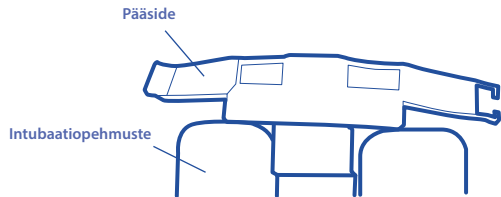


- 1 Aseta CSM2667 (pääside) intubaatiopehmusteelle

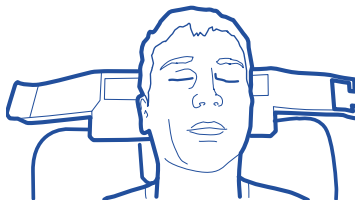

- 2 Intuboi potilas asennossa.




- 3 Taita pääside otsan yli.

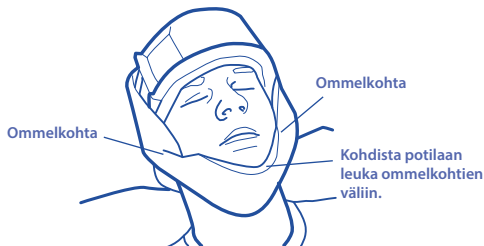

- 4 Keskitä leukahihna potilaaseen.



- 5 Kiinnitä ensimmäinen hihna potilaan pään yli tarranauhalla.

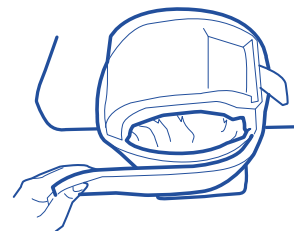

- 6 Kiinnitä toinen hihna potilaan pään yli tarranauhalla.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



⚠ **ÄLÄ KÄYTÄ UUDELLEEN!** Uudelleenkäyttö saattaa aiheuttaa potilaan vamman infektiöhalinnan ja tuotteen heikkenemisen seurauksena.

⚠ **TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN:** asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallisista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.

⚠ **ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita,** jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.




5 060624 120992




CARE SURGICAL

Produktkode: CSM2667

CS Head Strap Disposable

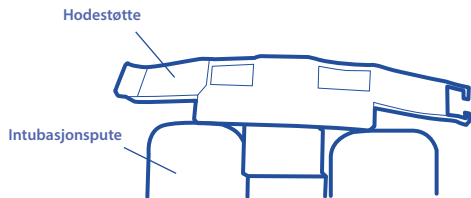


- 1** Plasser CSM2567 (hodestrapp) på intubasjonsputen

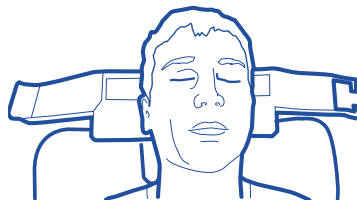

- 2** Intubere pasienten i stilling




- 3** Brett støtten over pannen

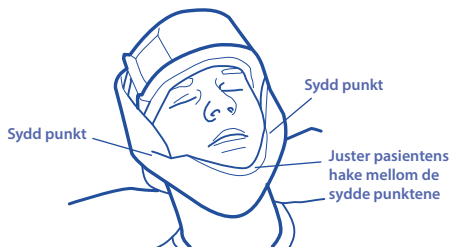

- 4** Senter hakestrappen på pasienten



- 5** Fest den første strappen over pasientens hode med Velcro®

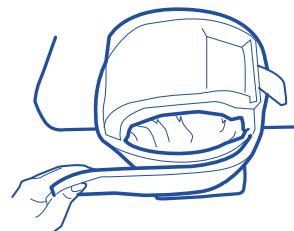

- 6** Fest den andre strappen over pasientens hode med Velcro®



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Irland



MÅ IKKE GJENBRUKES! Ved gjenbruk kan det oppstå skade på pasienten på grunn av problemer med infeksjonskontroll og forringelse av produktet.



TRYGG AVHENDING: Kunder må overholde alle lokale lover og forskrifter for trygg avhending av medisinsk utstyr.



IKKE BRUK produkter som ser ut til å være skadet eller utslitt. Ved produktskade eller pasientskade, vennligst ta kontakt med Care Surgical.



5 060624 120992

EU REP



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning