



CARE SURGICAL

Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2722 - 7

CS Supine Top (Base Only)




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2722-7

CS Supine Top (Base Only)

 Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

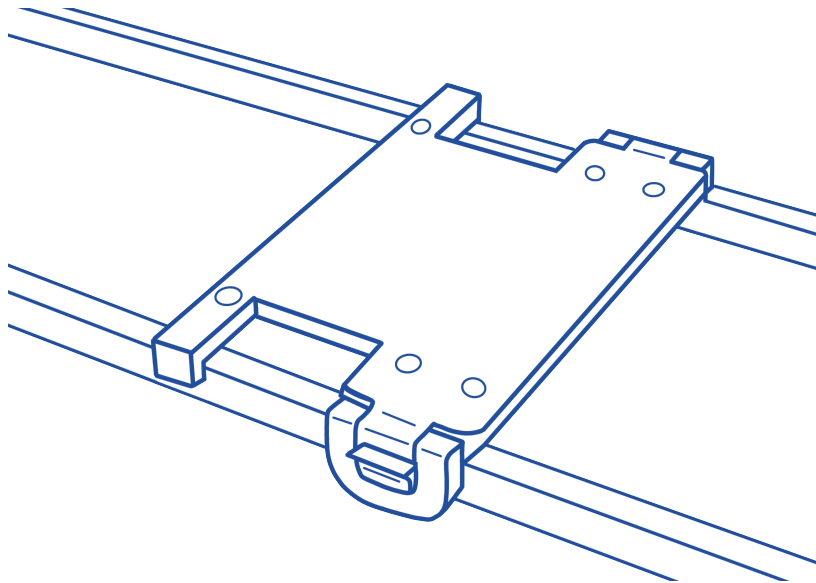

The CS Supine Top (Base Only) can be attached to most dual-rail operating tables on the market*

For use with e.g. CS Supine Top Foam Pads CSM2722-2, and -3

*Compatible with rail sizes that measure 1.25" (3.2cm) wide and 1.5" (3.8 cm) tall with 14.5" (36.8 cm) space between. Allen® is the registered trademark of Allen Medical Systems Inc.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.



DO NOT USE products that appear to be damaged or worn. In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 122392


EU REP




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2722-7


CS Supine Top (Base Only)

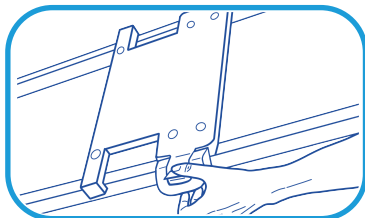

- 1 Place the support on to the frame so that the brackets are over the bars.

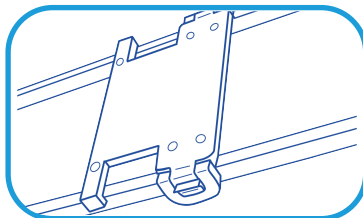

- 2 Snap the locking clip shut to secure the support into position.

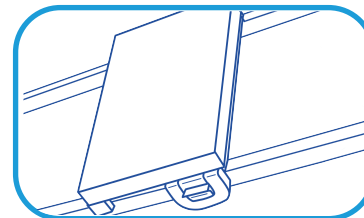

- 3 To adjust the position of the supports, release the clip(s), and slide the supports to the correct position, then snap lock the clip(s)

Cleaning instructions



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water



Do not autoclave

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



5 060624 122392


EU REP



CARE SURGICAL

Codice del prodotto: CSM2722-7

CS Supine Top (Base Only)

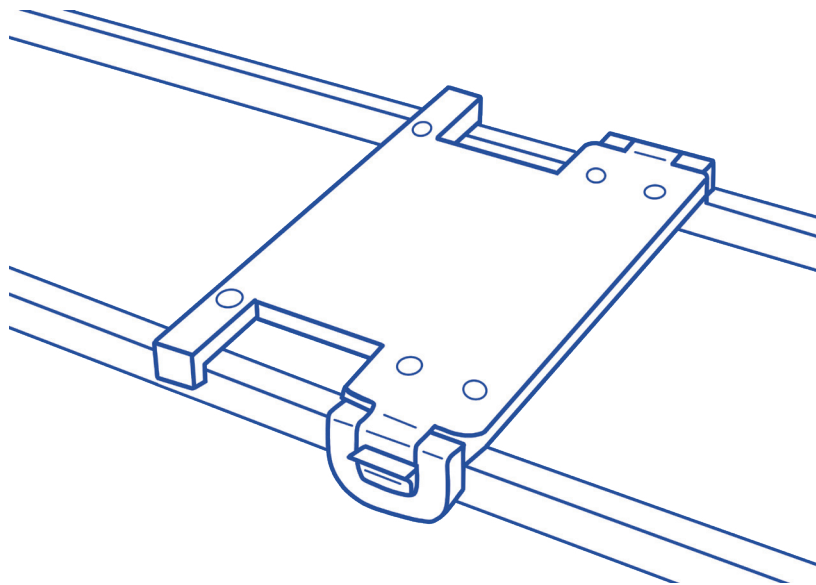

CS Supine Top (Base Only)
può essere fissato alla
maggior parte dei tavoli
operatori a doppia guida
presenti sul mercato*

Da utilizzare ad es. con CS
Supine Top Foam Pads
CSM2722-2 e -3

*Compatibile con guide di dimensioni pari a 3,2 cm di larghezza e 3,8 cm di altezza, con uno spazio intermedio di 36,8 cm. Allen® è il marchio registrato di Allen Medical Systems Inc.



Regno Unito: Care
Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Irlanda



peso massimo
paziente



SMALTIMENTO SICURO: i clienti devono attenersi alle leggi e alle normative locali in materia di smaltimento sicuro dei dispositivi medici.



NON UTILIZZARE prodotti che presentano segni di danneggiamento o usura. In caso di danni al prodotto o lesioni al paziente, contattare Care Surgical.




EU REP




CARE SURGICAL

CS Supine Top (Base Only)


Codice del prodotto: CSM2722-7

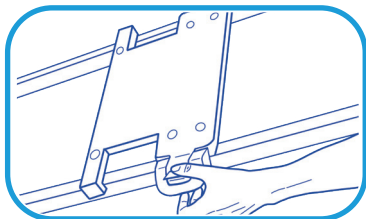

- 1 Posizionare gli agganci sul telaio in modo che le staffe si trovino sopra le barre.

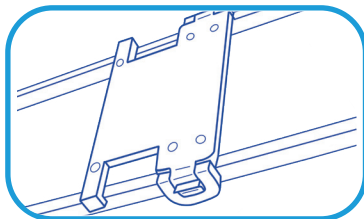

- 2 Chiudere la clip di bloccaggio per fissare l'aggancio in posizione.

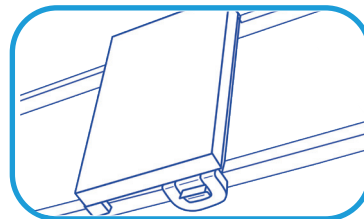

- 3 Collocare CS Supine Top Foam Pad al centro di CS Supine Top Base.

Istruzioni per la pulizia



Pulire con salviette ospedaliere standard



Non immergere in acqua



Non sterilizzare in autoclave



Regno Unito: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



5 060624 122392

EU REP

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublino, K78 X5P8 Irlanda



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning