



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2734

CS Yellofin Compatible Replacement Pads




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2734


CS Yellofin Compatible Replacement Pads

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.


CS Yellofin Compatible Replacement Pads ; use to support the patient's limb safely and comfortably whilst in the Yellofin Stirrup.

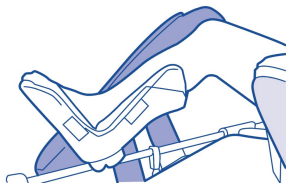

1 Position the patients leg and foot in the stirrup.

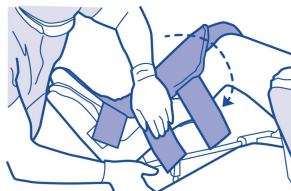

2 Ensuring the patient's leg is positioned correctly, take the stirrup pad straps and wrap the pad over and around the leg, enclosing the patients limb.

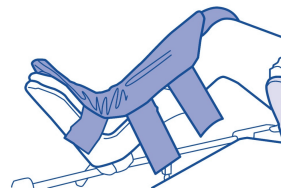

3 Ensure the pad is attached securely utilising the Velcro® straps.

Cleaning instructions:



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water



Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.

DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.

In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 122132




CARE SURGICAL

Produktkode: CSM2734

CS Yellofin Compatible Replacement Pads


CS Yellofin Compatible Replacement Pads, Venstre (CSM-2964) og/eller Højre (CSM-2965); bruges til at støtte patientens ekstremitet sikkert og komfortabelt, mens den er i Yellofin Stirrup.

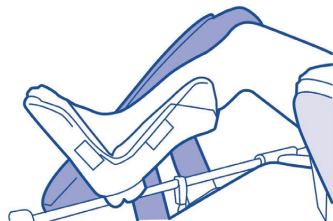

- 1** Placer patientens ben og fod i stighbøjlen.



- 2** Sørg for, at patientens ben er placeret korrekt, tag bøjlepudens stropper og vikl puden over og rundt om benet, så patientens ekstremitet omslutes.

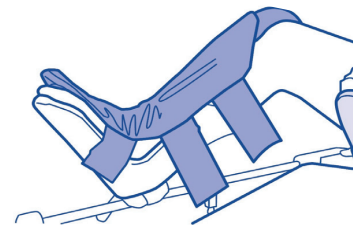

- 3** Sørg for, at puden er fastgjort sikkert ved hjælp af Velcro®-stropperne.

Rengøring:



Rengør ved brug af standard hospitalsservietter



Må ikke nedsænkes i vand



Autoklaver ikke



SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr.



UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient kontaktes Care Surgical.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



EU REP




CARE SURGICAL


Tuotekoodi: CSM2734

CS Yellofin Compatible Replacement Pads


CS Yellofin Compatible Replacement Pad -vaihtopehmuste vasemmanpuoleinen (CSM2964) ja/tai oikeanpuoleinen (CSM2965): käytetään potilaan raajan tukemiseen turvallisesti ja mukavasti, kun

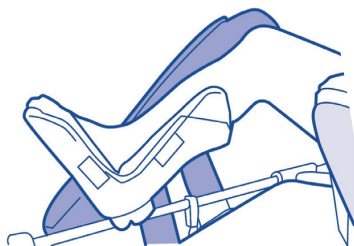

- 1 Asettele potilaan sääri ja jalkaterä jalkatukeen.

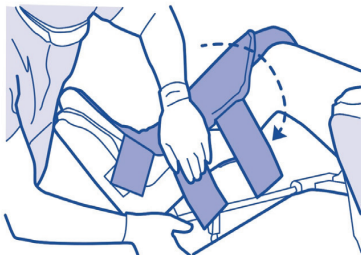

- 2 Varmista, että potilaan jalka on aseteltu oikein, tartu jalkatuen pehmusteen hihnnoihiin ja kierrä ne pehmusteen yli ja jalan ympäri niin, että potilaan raaja on niiden sisällä.

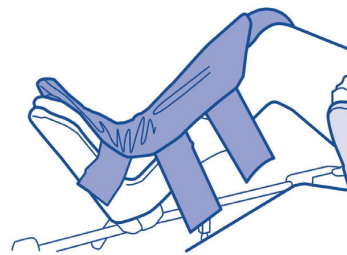

- 3 Varmista, että pehmuste on kiinnitetty tiukasti Velcro®-tarranauhoilla.

Pehmusteen puhdistus ja desinfiointi



Puhdista tavanomaisilla sairaalapyyhkeillä.



Älä upota veteen.



Älä steriloi autoklaavissa.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP



Potilaan enimmäispaino



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.



ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



5 060624 122132




CARE SURGICAL


Code produit : CSM2734

CS Yellofin Compatible Replacement Pads


CS Yellofin Compatible Replacement Pads gauche (CSM2964) et/ou droit (CSM2965) ; à utiliser pour soutenir le membre du patient en toute sécurité et confortablement lorsqu'il est placé dans le Yellofin Stirrup

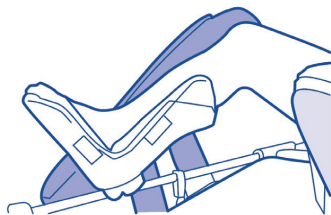

1 Positionnez la jambe et le pied du patient dans l'étrier.

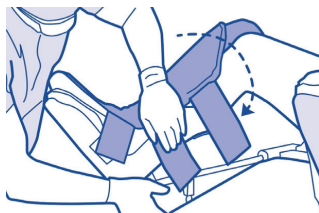

2 En vous assurant que la jambe du patient est correctement positionnée, prenez les sangles de l'étrier et enroulez le coussinet sur et autour de la jambe, en enveloppant le membre du patient.

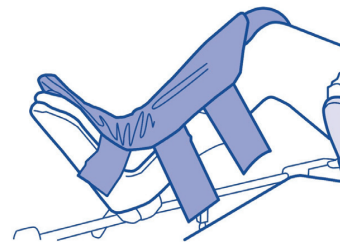

3 Assurez-vous que le coussinet est bien fixé à l'aide des bandes Velcro®.

Nettoyage:



Nettoyez à l'aide de lingettes hospitalières standard



Ne pas immerger dans l'eau



Ne pas autoclaver



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Poids maximum du patient



ÉLIMINATION SÛRE : les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.



NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



5 060624 122132

EU REP




CARE SURGICAL


Product Code: CSM2734

CS Yellofin Compatible Replacement Pads


CS Yellofin Compatible Replacement Pads , αριστερά (CSM2964) ή/και δεξιά (CSM2965) - χρησιμοποιούνται για την ασφαλή και άνετη στήριξη του άκρου του ασθενούς ενώ βρίσκεται στο Yellofin Stirrup.

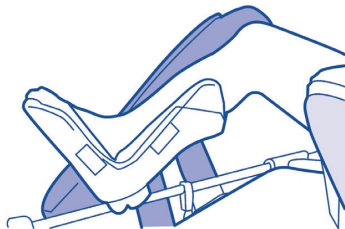

1 Τοποθετήστε το κάτω άκρο και το πόδι του ασθενούς στον αναβολέα.

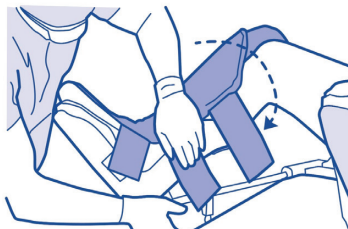

2 Βεβαιωθείτε ότι το πόδι του ασθενούς έχει τοποθετηθεί σωστά. Χρησιμοποιήστε τους ιμάντες του επιθέματος του αναβολέα για να τυλίξετε το επίθεμα γύρω από το κάτω άκρο ώστε να περιβάλλει το άκρο του ασθενούς.

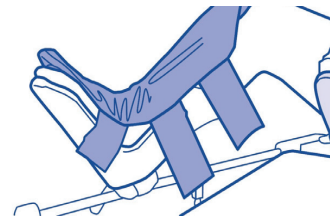

3 Βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα είναι στερεώνεται ασφαλώς χρησιμοποιώντας τους ιμάντες Velcro®.


Οδηγίες καθαρισμού



Καθαρίζετε με τα συνηθη νοσοκομειακά μαντηλάκια



Να μη βυθίζεται σε νερό

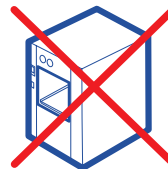

Να μην καθαρίζεται σε αυτόκαυστο



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Μέγιστο βάρος ασθενούς



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ: οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ή φθορά. Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος ή τραυματισμού του ασθενούς, επικοινωνήστε με την Care Surgical.



5 060624 122132





CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning