



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2647

CS Universal Arm Support - Moulded




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2647

CS Universal Arm Support™ - Moulded

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

Articulating armboard designed to enable safe and comfortable patient support in the prone, supine and lateral positions.

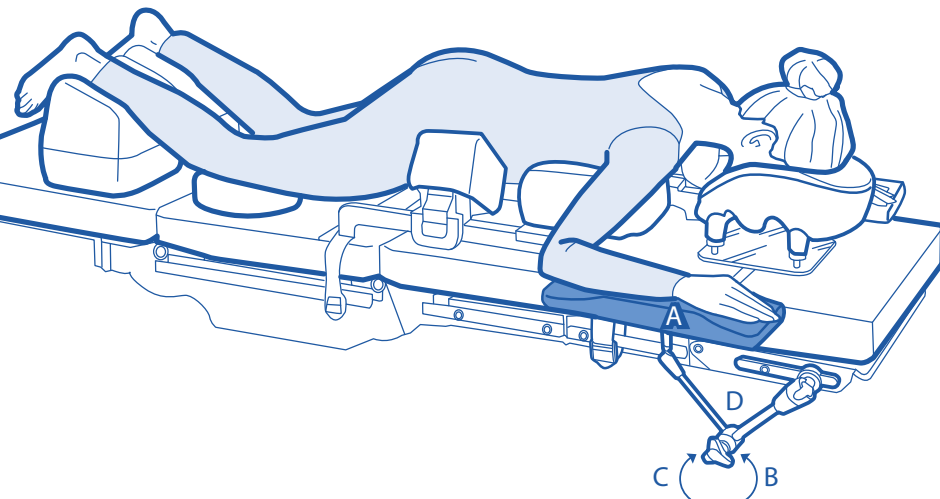

1. Hold the Universal Arm Support™ with one hand via the anterior segment (A) and manipulate the central clamping handle (D) with the other hand.
2. To release turn the central handle (D) counter clockwise (B) as far as necessary.
3. Move the Universal Arm Support™ into the desired position.
4. Turn the handle (D) clockwise (C) to secure into desired position.
5. Check that the Universal Arm Support™ is fixed firmly and is functioning correctly.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



Maximum
Weight

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws
and regulations to the safe disposal of medical devices.




DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury,
please contact Care Surgical.



5 060624 123511

CS Universal Arm Support™ - Positioning Solutions.

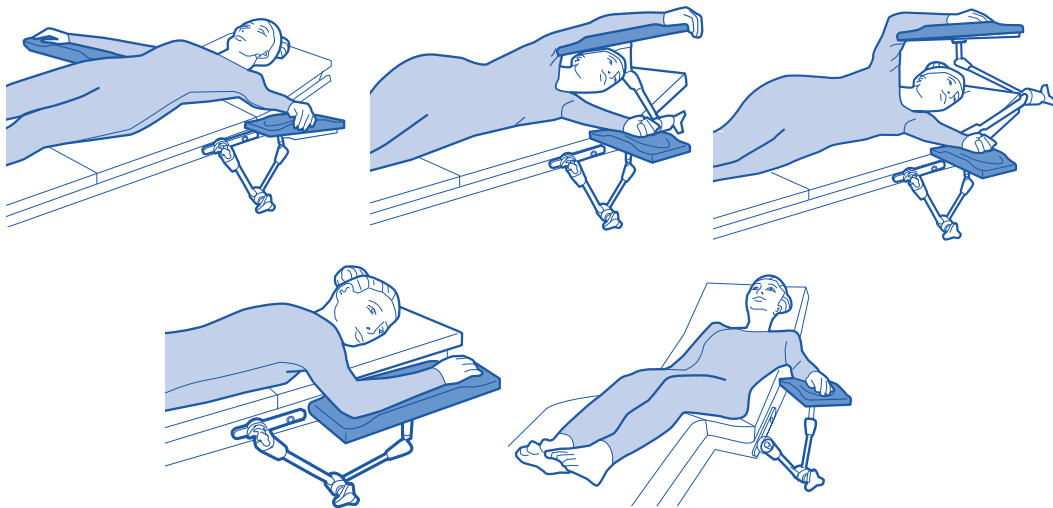

Cleaning Instructions



Clean using standard
hospital wipes



Do not immerse in water



Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Maximum
Weight



5 060624 123511




CARE SURGICAL

Produktkode: CSM2647

CS Universal Arm Support™ - Moulded

Leddelt armboard designet til at muliggøre sikker og komfortabel patientstøtte i bugleje, rygleje og laterale position.

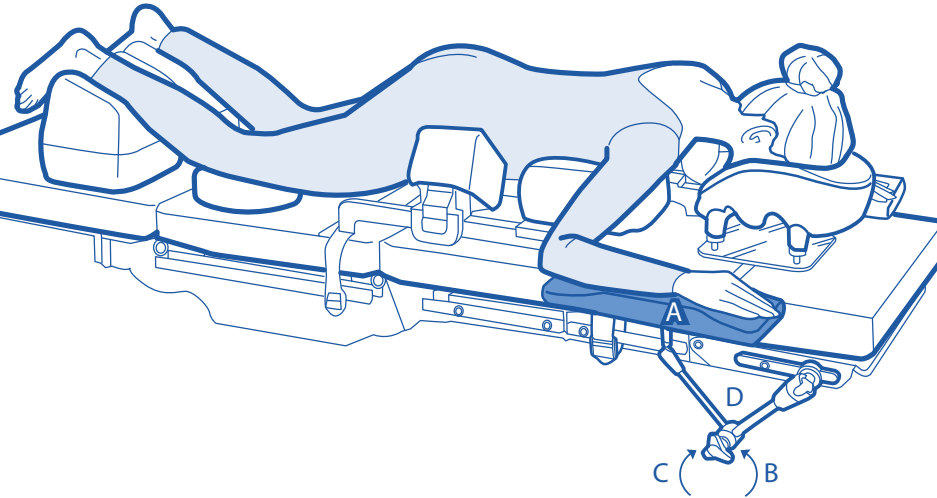

1. Hold universalarmstøtten med den ene hånd via det forreste segment (A) og manipuler det centrale klemmehåndtag (D) med den anden hånd.
2. For at frigøre skal du dreje det midterste håndtag (D) mod uret (B) så langt som nødvendigt.
3. Flyt universalarmstøtten til den ønskede position.
4. Drej håndtaget (D) med uret (C) for at fastgøre det i den ønskede position.
5. Kontroller, at universalarmstøtten sidder godt fast og fungerer korrekt.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland




SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr.



UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient kontaktes Care Surgical.



CS Universal Arm Support™ - Positioneringsløsninger.

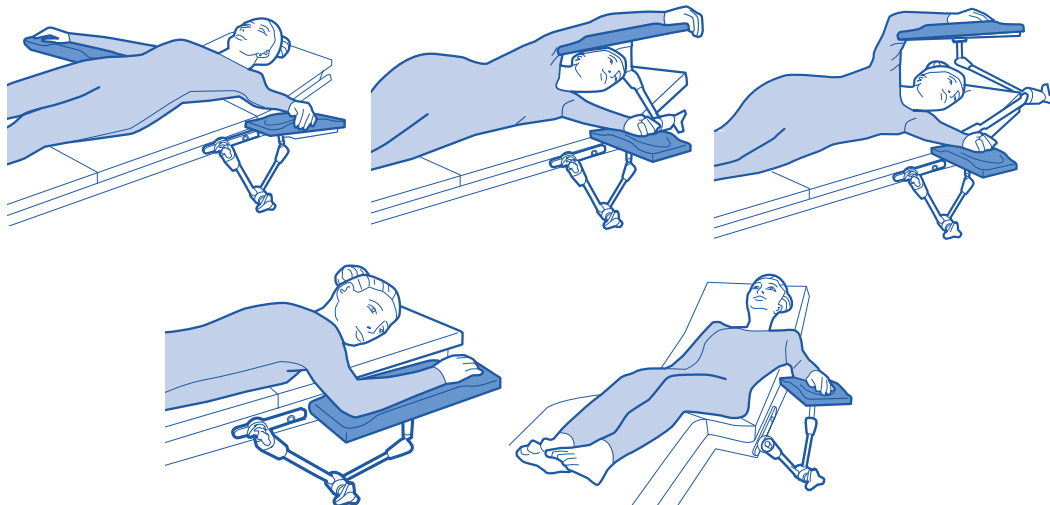

Rengøringsinstruktioner



Rengør ved brug af
standard hospitalsservietter



Må ikke nedsænkes i vand



Autoklaver ikke



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



maks
patientvægt



5 060624 123511




CARE SURGICAL

Productcode: CSM2647

CS Universal Arm Support™ - Moulded

⚠ Mag alleen door getrainde artsen worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product goed vastzit voordat u de patiënt in positie brengt.

Beweegbare armsteun ontworpen voor veilige en comfortabele ondersteuning van de patiënt in buik-, rug- en zijligging.

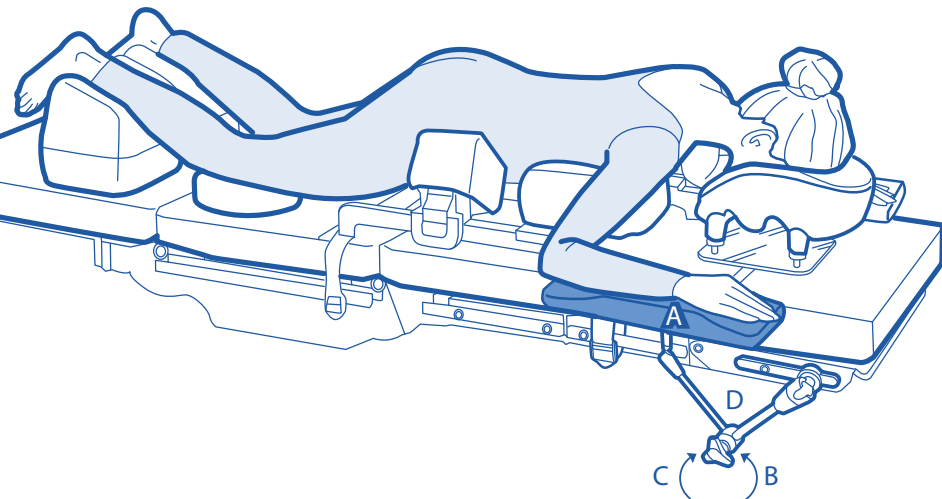

1. Houd de Universal Arm Support™ met één hand vast via het voorste segment (A) en bedien de centrale klemhendel (D) met de andere hand.
2. Om te ontgrendelen draait u de centrale hendel (D) zo ver als nodig is tegen de klok in (B).
3. Beweeg de Universal Arm Support™ naar de gewenste positie.
4. Draai de hendel (D) met de klok mee (C) om deze in de gewenste positie vast te zetten.
5. Controleer of de Universal Arm Support™ stevig is bevestigd en correct functioneert.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

EU REP

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



VEILIGE AFVOER: klanten moeten zich houden aan alle plaatselijke wetten en voorschriften voor de veilige afvoer van medische hulpmiddelen.



GEBRUIK GEEN producten die beschadigd of gebruikt lijken. Neem in geval van schade aan het product of letsel aan de patiënt contact op met Care Surgical.

MD

2

LATEX

NON
STERILE

UK
CA

CE


10kg

Maximumgewicht



5 060624 123511

CS Universal Arm Support™ - Positioneringsoplossingen.

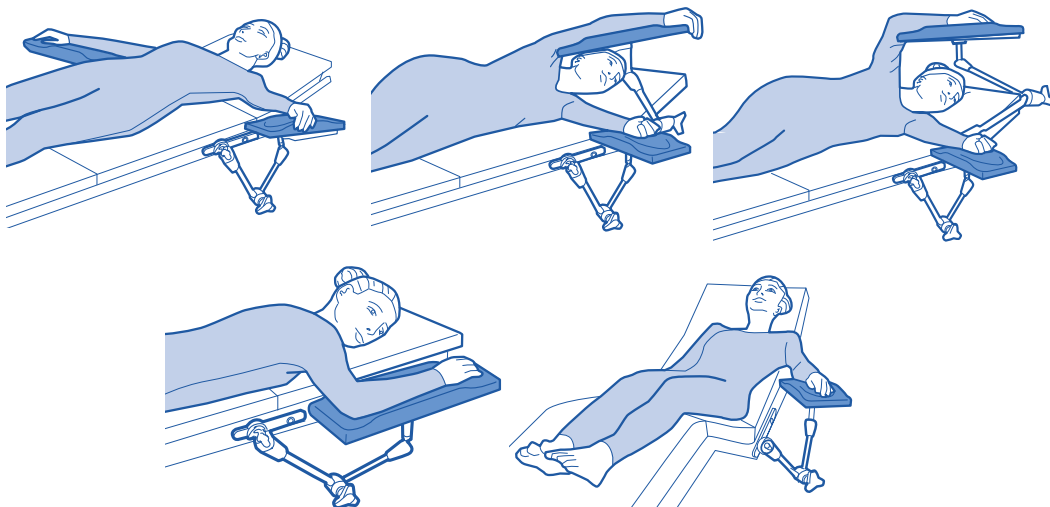

Reinigingsinstructies



Reinig met standaard
ziekenhuisdoekjes



Niet in water
onderdompelen



Niet autoclaveren



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

EU REP

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

MD

2

LATEX

NON
STERILE

UK
CA

CE

10kg

Maximumgewicht






CARE SURGICAL

Tuotekoodi: CSM2647

CS Universal Arm Support™ - Moulded

Niveltyvä käsivarsialusta, joka mahdollistaa potilaan turvallisen ja mukavan tukemisen päinmakuu-, selinmakuu- ja kylkiasennossa.

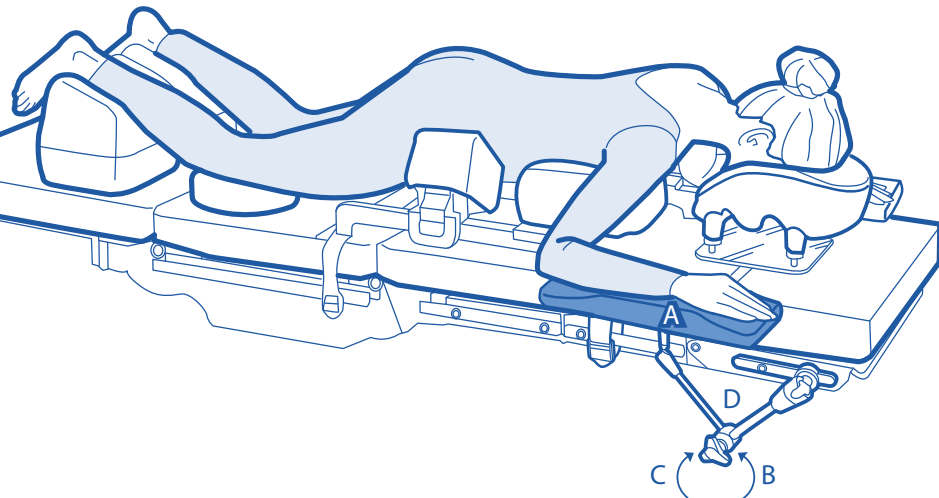

1. Pitele yleiskäsivarsitukea toisella kädellä anteriorisesta segmentistä (A) ja käytä keskikahvaa (D) toisella kädellä.
2. Vapauta kääntämällä keskikahvaa (D) vastapäivään (B) tarvittava määrä.
3. Siirrä yleiskäsivarsituki haluttuun asentoon.
4. Kiristä haluttuun asentoon kääntämällä kahvaa (D) myötäpäivään (C).
5. Tarkista, että yleiskäsivarsituki on kiinnitetty tiukasti ja toimii oikein.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Potilaan
enimmäispaino



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.




ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



5 060624 123511

CS Universal Arm Support™ -yleiskäsivarsituki – asetteluratkaisut.

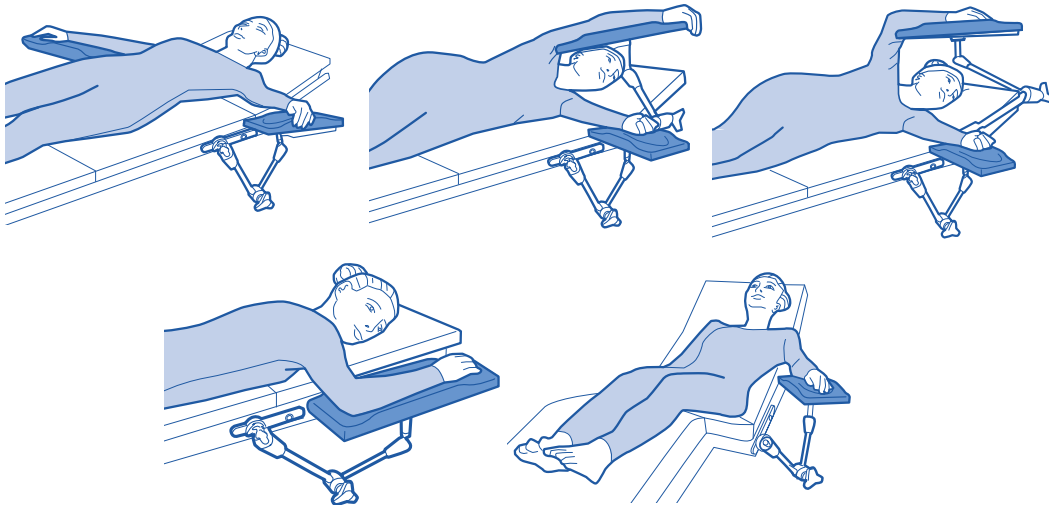

Puhdistusohjeet



Puhdista tavanomaisilla
sairaalapyyhkeillä.



Älä upota veteen.



Älä steriloi
autoklaavissa.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Potilaan
enimmäispaino



5 060624 123511




CARE SURGICAL

Code produit : CSM2647

CS Universal Arm Support™ - Moulded

⚠ Ne doit être utilisé que par des cliniciens qualifiés. Assurez-vous que le produit est fixé de manière sûre avant de positionner le patient.

Support de bras articulé conçu pour permettre un soutien sûr et confortable au patient dans les positions allongées sur le ventre, sur le dos et latérales.

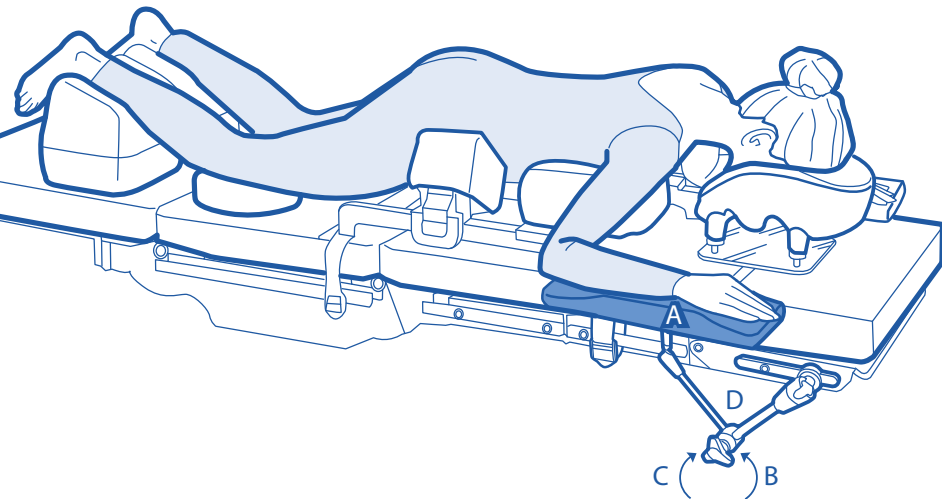

1. Maintenir l'Universal Arm Support™ d'une main via le segment antérieur (A) et manipuler la poignée de blocage centrale (D) de l'autre main.
2. Pour débloquer, tourner la poignée centrale (D) dans le sens antihoraire (B) aussi loin que nécessaire.
3. Déplacer l'Universal Arm Support™ dans la position souhaitée.
4. Tourner la poignée (D) dans le sens horaire (C) pour la bloquer dans la position souhaitée.
5. Vérifier que l'Universal Arm Support™ est fixé de manière sûre et fonctionne correctement.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



Poids
maximum

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



ÉLIMINATION SÛRE : les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.




NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



5 060624 123511

CS Universal Arm Support™ - Solutions de positionnement.

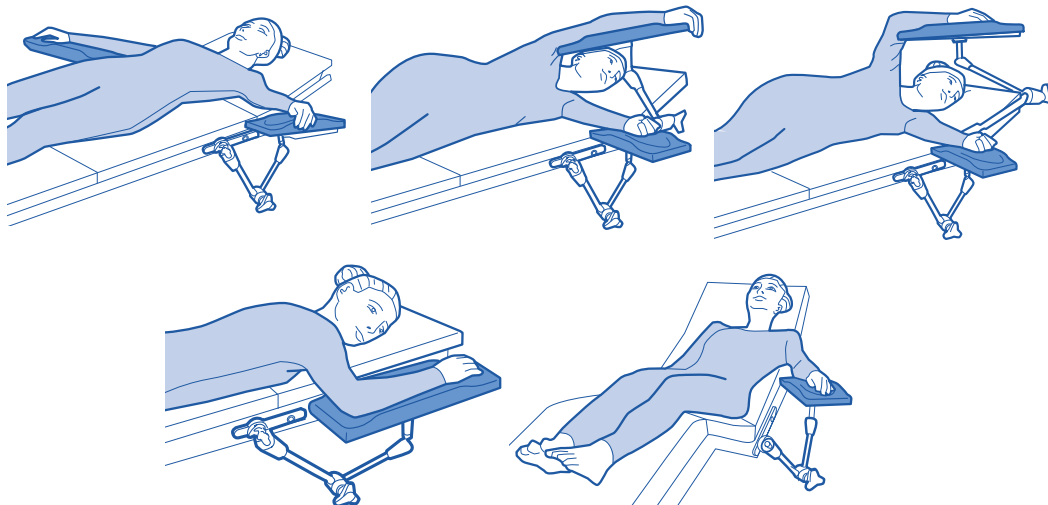

Instructions de nettoyage



Nettoyer à l'aide de lingettes
hospitalières standard



Ne pas immerger
dans l'eau



Ne pas autoclaver



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

EU REP

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Poids
maximum



5 060624 123511




CARE SURGICAL

Κωδικός προϊόντος: CSM2647

CS Universal Arm Support™ - Moulded

Αρθρωτός βραχίονας σχεδιασμένος για να επιτρέπει την ασφαλή και άνετη στήριξη του ασθενούς σε πρηνή, ύπτια και πλάγια θέση.

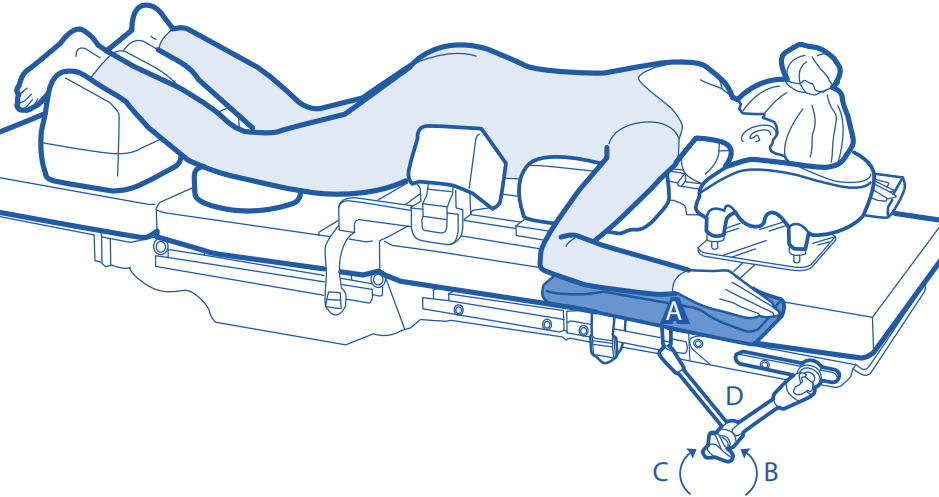

1. Κρατήστε τη διάταξη υποστήριξης βραχίονα γενικής χρήσης με το ένα χέρι μέσω του πρόσθιου τμήματος (Α) και ενεργήστε επί της κεντρικής λαβής σύσφιξης (Δ) με το άλλο χέρι.
2. Για χαλάρωση, γυρίστε την κεντρική λαβή (Δ) αριστερόστροφα (Β) όσο χρειάζεται.
3. Μετακινήστε τη διάταξη υποστήριξης βραχίονα γενικής χρήσης στην επιθυμητή θέση.
4. Γυρίστε τη λαβή (Δ) δεξιόστροφα (Γ) για να την ασφαλίσετε στην επιθυμητή θέση.
5. Ελέγξτε ότι η διάταξη υποστήριξης βραχίονα γενικής χρήσης είναι σταθερά στερεωμένο και λειτουργεί ορθώς.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 XSP8 Ireland



ÉLIMINATION SÛRE : les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.








NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



5 060624 123511

CS Universal Arm Support™ - Λύσεις τοποθέτησης.

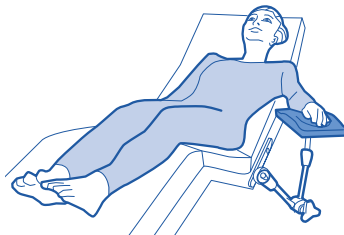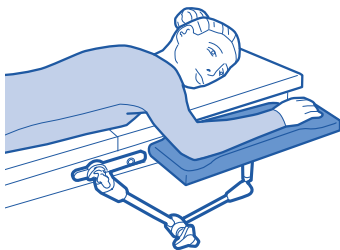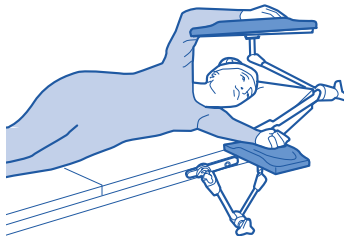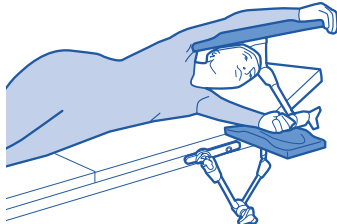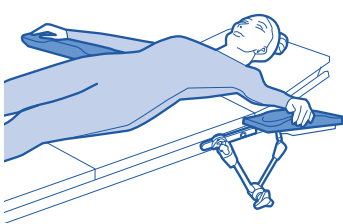

Οδηγίες καθαρισμού



Καθαρίζετε με τα συνήθη
νοσοκομειακά μαντηλάκια



Να μη βυθίζεται σε νερό Να μην καθαρίζεται σε
αυτόκαυστο



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Μέγιστο βάρος
ασθενούς



5 060624 123511




CARE SURGICAL

Codice del prodotto: CSM2647

CS Universal Arm Support™ Moulded

Poggia-braccio articolato progettato per consentire un supporto sicuro e confortevole del paziente in posizione prona, supina e laterale.

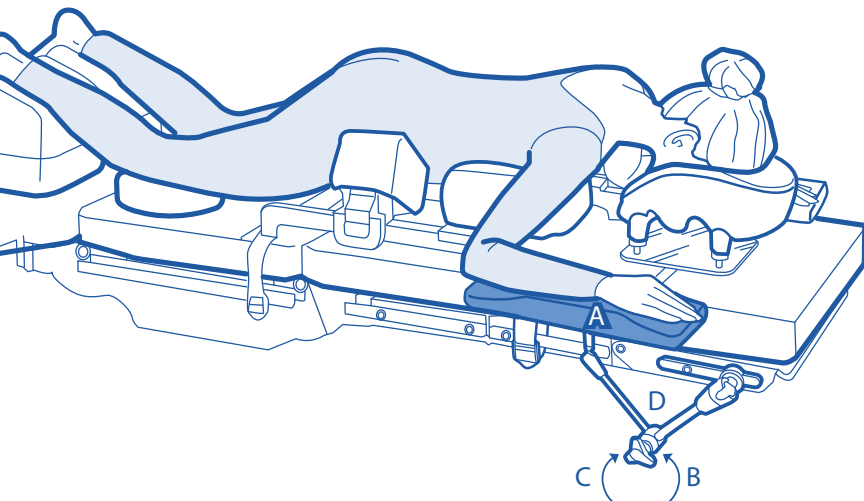

1. Tenere il supporto universale per braccio con una mano dal segmento anteriore (A) e regolare la maniglia di serraggio centrale (D) con l'altra mano.
2. Per allentare, ruotare la manopola centrale (D) in senso antiorario (B) fino a quando necessario.
3. Spostare il supporto universale per braccio nella posizione desiderata.
4. Ruotare la manopola (D) in senso orario (C) per serrarla nella posizione desiderata.
5. Verificare che il supporto universale per braccio sia fissato saldamente e funzioni correttamente.



Regno Unito: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublino, K78 X5P8 Irlanda



peso massimo
paziente


NON RIUTILIZZARE! Il riutilizzo potrebbe causare lesioni al paziente dovute a problemi legati al controllo delle infezioni e al deterioramento del prodotto.
SMALTIMENTO SICURO: i clienti devono attenersi alle leggi e alle normative locali in materia di smaltimento sicuro dei dispositivi medici.
NON UTILIZZARE prodotti che presentano segni di danneggiamento o usura. In caso di danni al prodotto o lesioni al paziente, contattare Care Surgical.



5 060624 123511

EU REP

CS Universal Arm Support™: soluzioni per il posizionamento.

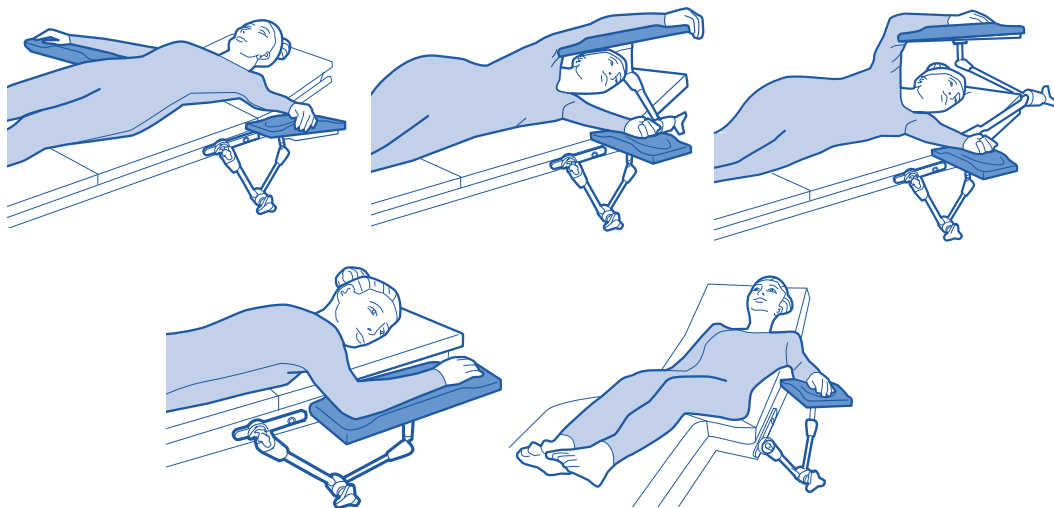


Istruzioni per la pulizia



Pulire con salviette
ospedaliere standard



Non immergere in acqua

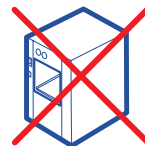

Non sterilizzare in
autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

EU REP

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Peso massimo



5 060624 123511




CARE SURGICAL

Produktkod: CSM2647

CS Universal Arm Support - Moulded

⚠ Får endast användas av utbildade läkare. Säkerställ att produkten har satts fast innan patienten placeras.

Vridbart armstöd utformat för säkert och bekvämt stöd åt patienten i magläge, rygläge och sidoläge.

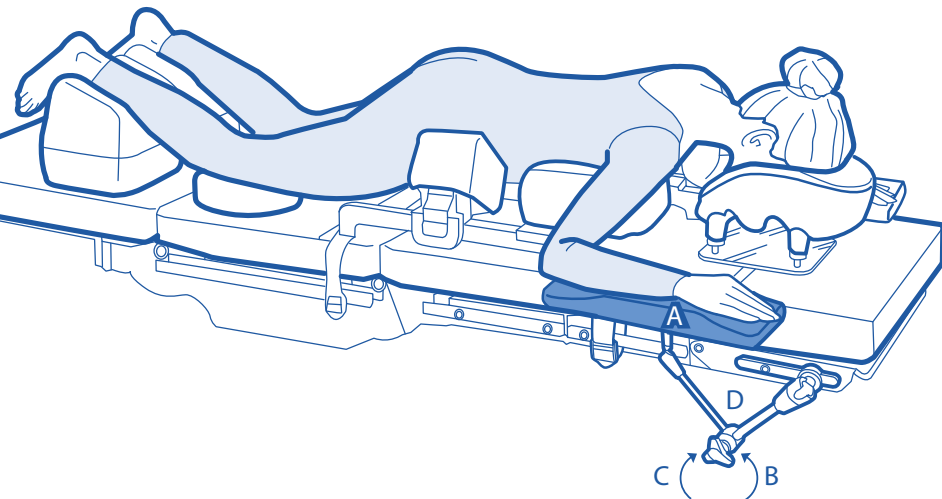

1. Håll det Universal Arm Support med en hand i det främre segmentet (A) och manövrera det centrala spännhandtaget (D) med den andra handen.
2. För att lossa på armstödet: Vrid det centrala handtaget (D) moturs (B) så lång som krävs.
3. Flytta det Universal Arm Support till den önskade positionen.
4. Vrid handtaget (D) medurs (C) för att sätta fast armstödet i önskad position.
5. Kontrollera att det Universal Arm Support är stabilt fastsatt och fungerar korrekt.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

EU REP

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SÄKER KASSERING: Kunderna ska följa alla lokala lagar och förordningar för säker kassering av medicintekniska produkter. Produkter **FÅR INTE ANVÄNDAS** om de visar sig vara skadade eller slitna. I händelse av en produktskada eller patientskada, kontakta Care Surgical.



MD

2

LATEX

NON STERILE

UK CA

CE


10kg

Maximal vikt



5 060624 123511

CS Universal Arm Support - Positioneringslösningar.

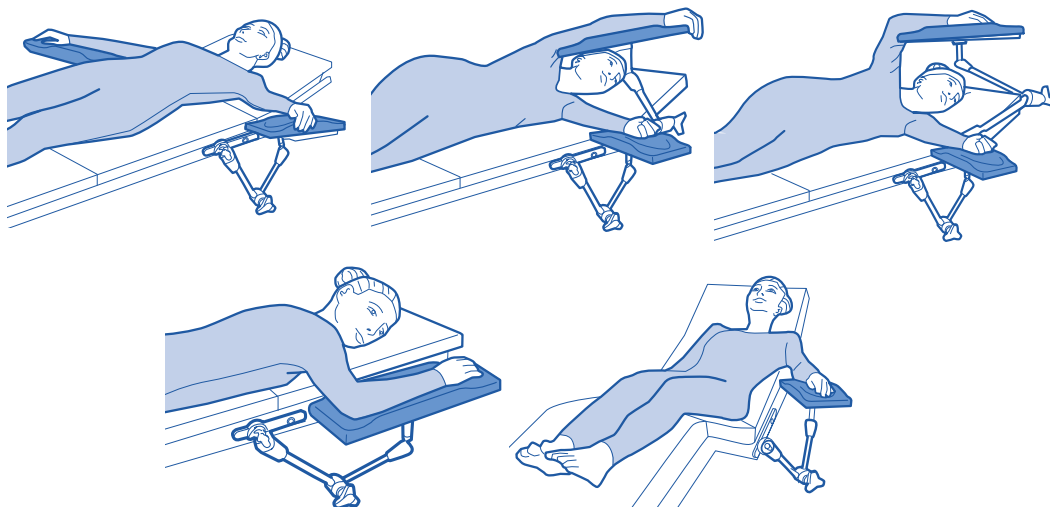

Rengöringsanvisningar



Rengör med torkdukar avsedda för sjukhusanvändning



Sänk inte ned i vatten



Autoklavera inte



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Maximal
vikt



5 060624 123511



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning