



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2750

CS Standard Replacement Stirrup Pads




CARE SURGICAL

Product Code: CSM2750

CS Standard Replacement Stirrup Pads (Pair)

⚠ Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

CS Standard Replacement Stirrup Pads (Pair)

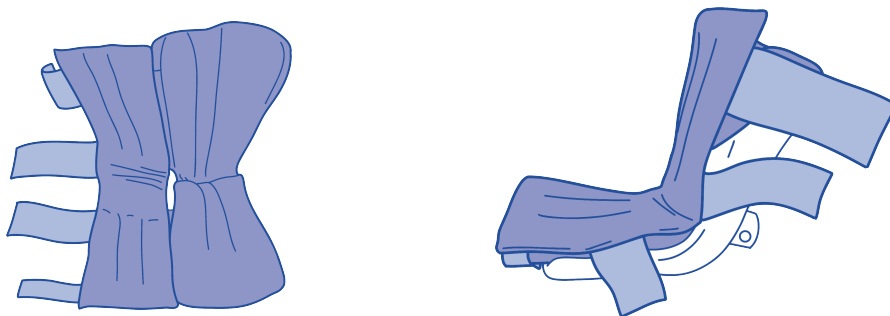

For use refer to manufacturer's instructions.


Cleaning instructions:



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water

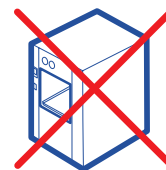

Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

⚠ SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
⚠ DO NOT USE products that appear to be damaged or worn. In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 123689




CARE SURGICAL


Produktkode: CSM 2750

CS Standard Replacement Stirrup Pads (Par)

CS Standard Replacement Stirrup Pads (par)

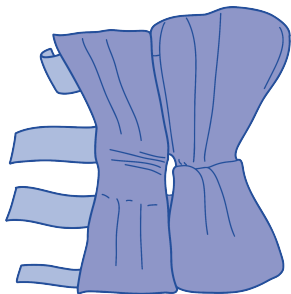

Placer patientens ben og fod i
stigbøjlepuden.

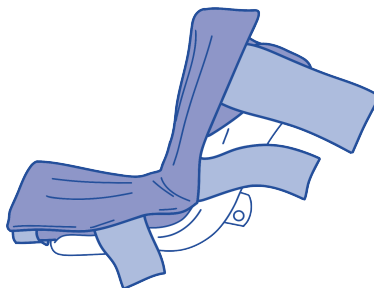

Når patientens ben er korrekt placeret,
skal du lukke puden ved at placere
klappen over benet og fastgøre
velcrofikseringsstropperne sikkert.

Rengøring:



Rengør ved
brug af standard
hospitalsservietter



Må ikke nedsænkes i
vand



Autoklaver ikke



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



Maks
Patientvægt



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal
lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af
medicinsk udstyr.



UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede
eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient
kontaktes Care Surgical.



5 060624 123689

EU REP




CARE SURGICAL


Tuotekoodi: CSM 2750

CS Standard Replacement Stirrup Pads (Par)

CS Standard Replacement Stirrup Pads -vaihtopehmustepari

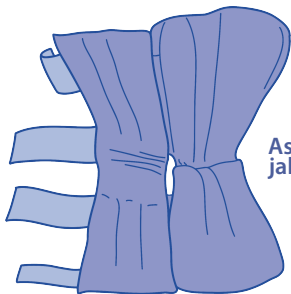


Asettele potilaan sääri ja jalkaterä jalkatuen pehmusteeseen.

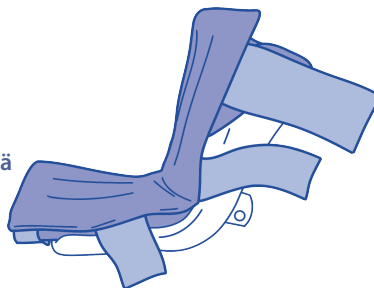

Kun potilaan sääri on aseteltu oikein, sulje pehmuste asettamalla läppä säären yli ja kiinnittämällä tarranauhat tiukasti.

Puhdistus

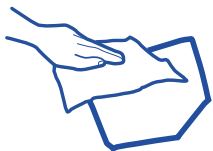

Puhdista tavanomaisilla sairaaalapyyhkeillä.



Älä upota veteen.



Älä steriloi autoklaavissa.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.



ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



5 060624 123689

EU REP




CARE SURGICAL


Code produit : CSM 2750

CS Standard Replacement Stirrup Pads (Paire)

CS Standard Replacement Stirrup Pads (Paire)

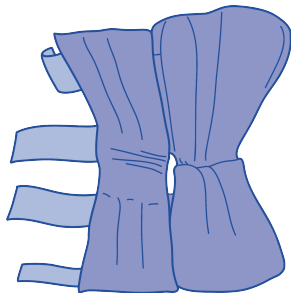

Positionnez la jambe et le pied du patient dans le coussinet de l'étrier.

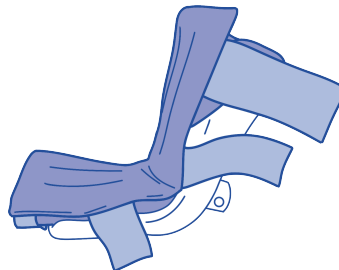

Une fois la jambe du patient correctement positionnée, fermez le coussinet en plaçant le rabat sur la jambe et en attachant fermement les sangles de fixation en velcro.


Instructions de nettoyage



Nettoyez à l'aide de lingettes hospitalières standard



Ne pas immerger dans l'eau

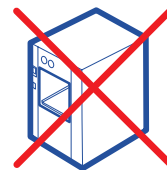

Ne pas autoclaver



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



ÉLIMINATION SÛRE: les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.



NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.



EU REP




CARE SURGICAL


Κωδικός προϊόντος: CSM2750

CS Standard Replacement Stirrup Pads (ζεύγος)

CS Standard Replacement Stirrup Pads (ζεύγος)

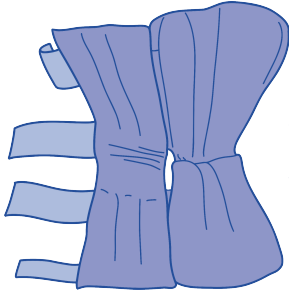


Τοποθετήστε το κάτω άκρο και το πόδι του ασθενούς στο επίθεμα του αναβολέα.

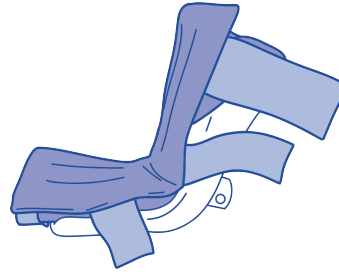

Μόλις το κάτω άκρο του ασθενούς τοποθετηθεί σωστά, κλείστε το επίθεμα τοποθετώντας το κάλυμμα πάνω από το κάτω άκρο και συνδέστε με ασφάλεια τους ιμάντες στερέωσης Velcro.

Καθαρισμός

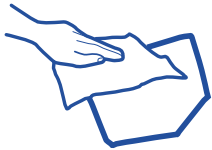

Καθαρίζετε με τα συνήθη νοσοκομειακά μαντηλάκια



Να μη βυθίζεται σε νερό



Να μην καθαρίζεται σε αυτόκαυστο



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΙΨΗ: οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.



ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά ή φθορά. Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος ή τραυματισμού του ασθενούς, επικοινωνήστε με την Care Surgical.



5 060624 123689

EU REP



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning