



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2519

CS ProneOne™ Head Support- Small



CARE SURGICAL

Product Code: CSM2519

CS ProneOne™ Head Support- Small


*Suitable for patients up to 8 years

The CS ProneOne™ offers support to your patient's forehead and cheeks. Ensure the eyebrows are visible to avoid direct pressure to the eyes.


⚠ Only to be used by trained clinicians.




Step 1 Prepare intubated patient in the supine position

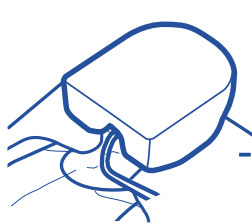

Step 2 Place cushion onto patient's face*

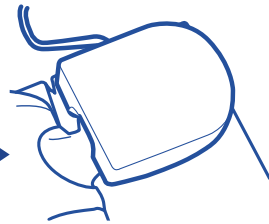


Step 3 Position ET tube to the intubation slot

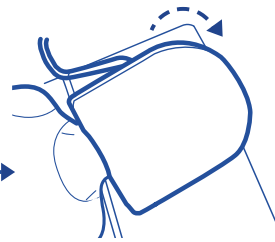

Step 4 Turn patient to prone position



Step 5 Ensure tubing is still connected and cushion is in the correct position, not obstructing the patient's eyes or airway

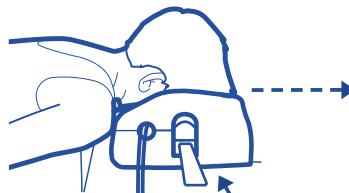

Step 6 Slide mirror into place



Step 7 Using the mirror ensure the face is correctly positioned in cushion ensuring tubing is connected and eyebrows are visible



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



⚠ **DO NOT REUSE!** If reused injury to patient could occur due to issues with infection control and deterioration of the product.
⚠ **SAFE DISPOSAL:** customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.
⚠ **DO NOT USE** products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury, please contact Care Surgical.



5 060624 120039

The Forehead & Cheeks

Possible problems


- + Pressure ulcers
- + Facial edema

Possible causes

- + Inadequate blood supply due to prolonged excessive pressure
- + Shear, affecting the blood flow to the forehead or cheeks
- + Friction injury due to a period of continuous movement
- + Patient incorrectly positioned in the face support
- + High risk patient (includes the elderly, diabetics, smokers and those taking certain medications, eg steroids)

Reduce the risk

- + Ensure the patient's face is supported on the bony part of their cheeks, not the soft tissue
- + Ensure the patient's eyebrows are clearly visible
- + The face support must not encroach into the periorbital area above or below the eye
- + Recheck the head support after turning the patient and at least every 30 minutes throughout the procedure
- + It may be necessary to lift and replace the patient's face during long procedures or if there has been movement

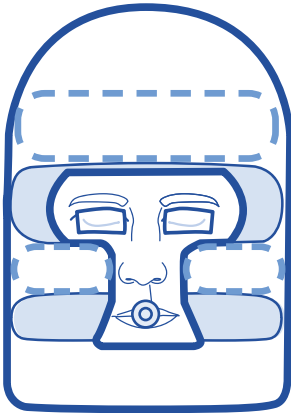

See the instructional video
at www.care-surgical.com



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



CARE SURGICAL


Artikelnummer: CSM2519

CS ProneOne™ Head Support- Small

*Empfohlen für Patienten bis zum Alter von 8 Jahren

Die CS ProneOne Head Support - Small stützt die Stirn und die Wangen Ihres Patienten.
Achten Sie darauf, dass die Augenbrauen sichtbar sind, um direkten Druck auf die Augen zu vermeiden.

⚠ Nur für den Einsatz durch geschultes Personal geeignet.

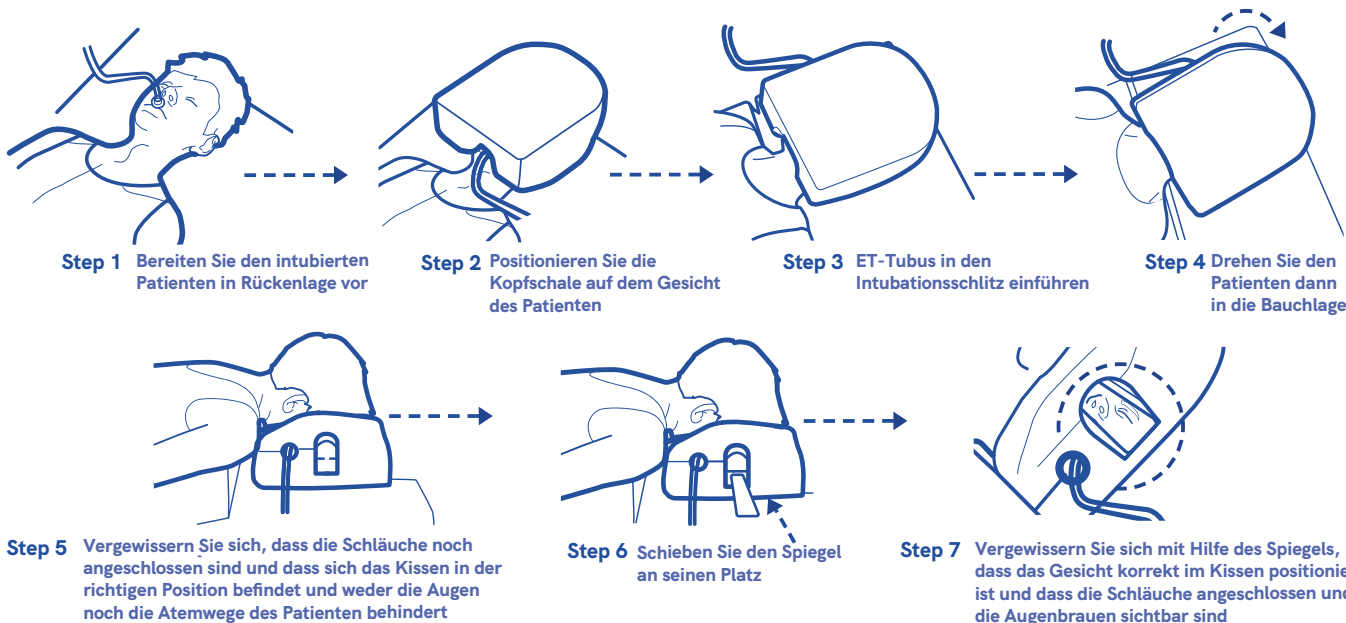

UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



⚠ **Nicht wiederverwenden!** Bei Wiederverwendung kann es aufgrund von erschwerter Infektionskontrolle und der Alterung des Produkts zu Verletzungen des Patienten kommen.

⚠ **Sichere Entsorgung:** Kunden sollten alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur sicheren Entsorgung von Medizinprodukten einhalten.

⚠ **Verwenden Sie keine Produkte:** die beschädigt oder abgenutzt erscheinen. Im Falle einer Produktbeschädigung oder einer Verletzung des Patienten wenden Sie sich bitte an Care Surgical.



Stirn & Wangen

Mögliche Probleme


- + Dekubitus
- + Gesichtssedeme

Mögliche Ursachen

- + Unzureichende Durchblutung aufgrund anhaltenden übermäßigen Drucks
- + Scherkräfte, die die Durchblutung der Stirn oder der Wangen beeinträchtigen
- + Reibungsverletzungen aufgrund längerer, kontinuierlicher Bewegung
Falsche Lagerung des Patienten im Kopflagerungskissen
- + Risikopatienten (dazu zählen ältere Menschen, Diabetiker, Raucher und Personen, die bestimmte Medikamente einnehmen, z. B. Steroide)

Minimieren des Risikos

- + Achten Sie darauf, dass das Gesicht des Patienten auf dem knöchernen Teil der Wangen aufliegt, nicht auf dem Weichgewebe
- + Achten Sie darauf, dass die Augenbrauen des Patienten gut sichtbar sind
- + Das Kopflagerungskissen darf nicht in den periorbitalen Bereich oberhalb oder unterhalb des Auges hineinragen
- + Überprüfen Sie die Positionierung nach dem Drehen des Patienten und während des gesamten Eingriffs mindestens alle 30 Minuten
- + Bei langen Eingriffen oder bei Bewegungen des Patienten kann es erforderlich sein, das Gesicht des Patienten anzuheben und neu zu positionieren

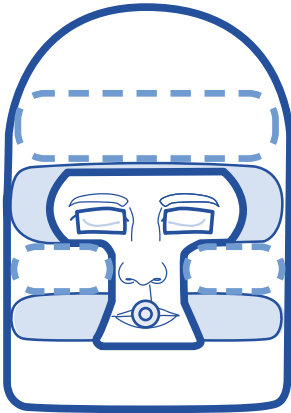

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo unter www.care-surgical.com an



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com



Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main
Street, Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



CARE SURGICAL

Codice del prodotto: CSM2519


CS ProneOne™ Head Support Small

*Adatto a pazienti di età fino agli 8 anni di età


CS ProneOne™ offre sostegno alla fronte e alle guance del paziente. Assicurarsi che le sopracciglia siano visibili per evitare una pressione diretta sugli occhi.




Fase 1 Preparare il paziente intubato in posizione supina

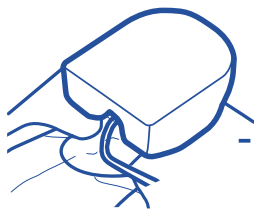

Fase 2 Posizionare il cuscino sul viso del paziente*

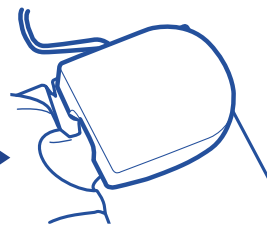


Fase 3 Posizionare il tubo ET nella presa per l'intubazione

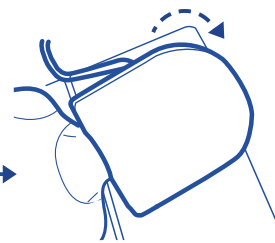

Fase 4 Girare il paziente in posizione prona



Fase 5 Verificare che il tubo sia ancora collegato e che il cuscino sia nella posizione corretta, e non ostruisca gli occhi o le vie respiratorie del paziente.

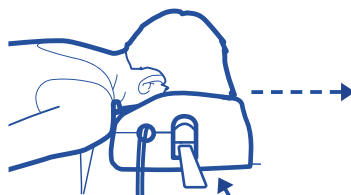

Fase 6 Far scorrere lo specchio in posizione



Fase 7 Utilizzando lo specchio, assicurarsi che il viso sia posizionato correttamente sul cuscino, che i tubi siano collegati e che le sopracciglia siano visibili



Regno Unito: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Irlanda



peso massimo
paziente



NON RIUTILIZZARE! Il riutilizzo potrebbe causare lesioni al paziente dovute a problemi legati al controllo delle infezioni e al deterioramento del prodotto.



SMALTIMENTO SICURO: i clienti devono attenersi alle leggi e alle normative locali in materia di smaltimento sicuro dei dispositivi medici.



NON UTILIZZARE prodotti che presentano segni di danneggiamento o usura. In caso di danni al prodotto o lesioni al paziente, contattare Care Surgical.



5 060624 120039

EU REP

Le front et les joues

Problèmes possibles


- + Ulcères de pression
- + Œdème facial

Causes possibles

- + Apport sanguin insuffisant dû à une pression excessive prolongée
- + Cisaillement, affectant le flux sanguin vers le front ou les joues
- + Lésion par friction due à une période de mouvement continu
- + Patient mal positionné dans le support facial
- + Patient à haut risque (personnes âgées, diabétiques, fumeurs et personnes prenant certains médicaments, par exemple des stéroïdes)

Réduire le risque

- + Veillez à ce que le visage du patient repose sur la partie osseuse de ses joues, et non sur les tissus mous
- + Veillez à ce que les sourcils du patient soient clairement visibles
- + Le support facial ne doit pas empiéter sur la zone périorbitaire au-dessus ou en dessous de l'œil
- + Recontrôlez le support de tête après avoir tourné le patient et au moins toutes les 30 minutes pendant toute la durée de la procédure
- + Il peut être nécessaire de soulever et repositionner le visage du patient lors de procédures longues ou en cas de mouvement

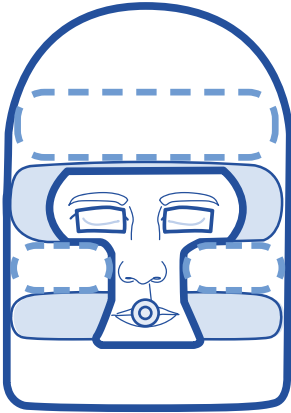

**Consultez la vidéo
d'instruction sur le site
www.care-surgical.com**



UK : Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel. : 01704 336671

USA : Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel. : 866-243-4107



5 060624 120039

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland






CARE SURGICAL

Code produit : CSM2519

CS ProneOne™ Head Support-Small

*Convient aux patients jusqu'à 8 ans

Le CS ProneOne™ offre un soutien au front et aux joues de votre patient. Veillez à ce que les sourcils soient visibles pour éviter toute pression directe sur les yeux.

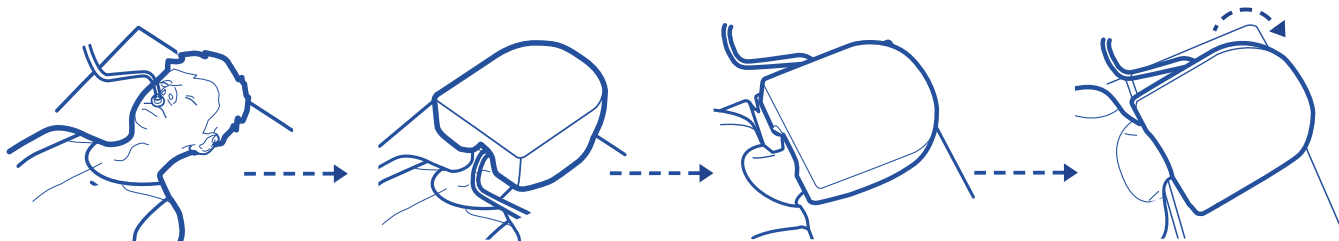

Étape 1 Préparez le patient intubé en position allongée sur le dos


Étape 2 Placez le coussin sur le visage du patient*

Étape 3 Positionnez le tube endotrachéal dans la fente prévue pour l'intubation

Étape 4 Tournez le patient en position allongée sur le ventre



Étape 5 Assurez-vous que la tubulure est toujours connectée et que le coussin est dans la bonne position, n'obstruant pas les yeux ou les voies respiratoires du patient.

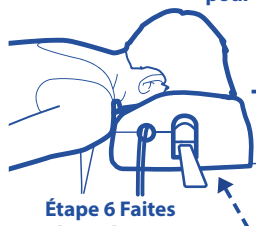

Étape 6 Faites glisser le miroir en place



Étape 7 À l'aide du miroir, assurez-vous que le visage est correctement positionné dans le coussin, que la tubulure est connectée et que les sourcils sont visibles



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



Poids maximum
du patient



5 060624 122873



NE PAS RÉUTILISER ! lors de la survenue d'une nouvelle lésion du patient en raison de problèmes de contrôle d'une infection ou de détérioration du produit.



ÉLIMINATION SÛRE : les clients doivent se conformer à toutes les lois et réglementations locales lors de l'élimination de manière sûre des dispositifs médicaux.



NE PAS UTILISER les produits qui semblent endommagés ou usés. Dans le cas d'un produit endommagé ou de lésions du patient, veuillez contacter Care Surgical.

EU REP

Le front et les joues

Problèmes possibles


- + Ulcères de pression
- + Œdème facial

Causes possibles

- + Apport sanguin insuffisant dû à une pression excessive prolongée
- + Cisaillement, affectant le flux sanguin vers le front ou les joues
- + Lésion par friction due à une période de mouvement continu
- + Patient mal positionné dans le support facial
- + Patient à haut risque (personnes âgées, diabétiques, fumeurs et personnes prenant certains médicaments, par exemple des stéroïdes)

Réduire le risque

- + Veillez à ce que le visage du patient repose sur la partie osseuse de ses joues, et non sur les tissus mous
- + Veillez à ce que les sourcils du patient soient clairement visibles
- + Le support facial ne doit pas empiéter sur la zone périorbitaire au-dessus ou en dessous de l'œil
- + Recontrôlez le support de tête après avoir tourné le patient et au moins toutes les 30 minutes pendant toute la durée de la procédure
- + Il peut être nécessaire de soulever et repositionner le visage du patient lors de procédures longues ou en cas de mouvement

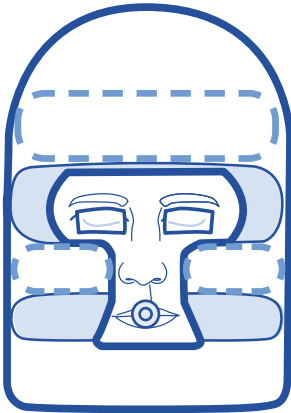

**Consultez la vidéo
d'instruction sur le site
www.care-surgical.com**



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland





CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning