



CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning

INSTRUCTIONS FOR USE

CSM2649


CS Universal Arm Support - Extended



CARE SURGICAL

Product Code: CSM2649


CS Universal Arm Support™ - Extended

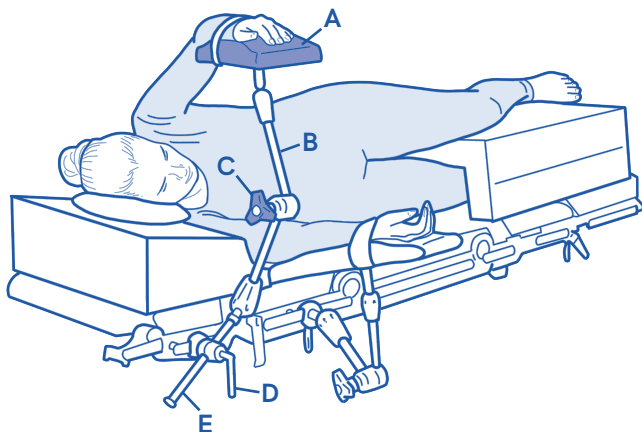

Only to be used by trained clinicians. Ensure product is secure before positioning patient.

CS Universal Arm Support™ - Extended; used to position the patients arm in the prone, supine or lateral position.

A = Pad
B = Articulated Arm
C = Central Handle
D = Rail Clamp
E = Column

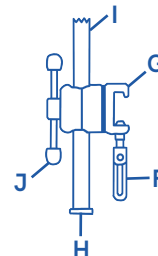

The Rail Clamp (D):
F = Fastening Screw
G = Upper Hook
H = Stop Lid
I(E) = Column
J = Fastening Handle


Cleaning instructions:



Clean using standard hospital wipes



Do not immerse in water

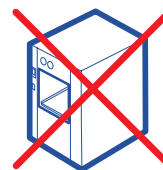

Do not autoclave



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



SAFE DISPOSAL: customers should adhere to any local laws and regulations to the safe disposal of medical devices.



DO NOT USE products that appear to be damaged or worn.
In an event of product damage or patient injury,
please contact Care Surgical.



5 060624 126499

EU REP



CARE SURGICAL

CS Universal Arm Support™ - Extended

Attachment to the table:

1. Attach the rail clamp (D) to the side of the surgical table and secure it by turning the fastening screw (F) from below clockwise
2. Pay attention during attachment that the upper hook (G) grabs behind the rail. Check if the rail clamp (D) is fixed securely and firmly on the side rail
3. Remove the stop lid (H) and insert the column (I) into the opening of the radial setting clamp.
4. Fix it with the fastening handle (J)

Mount the stop lid

5. Check if the column is fixed securely and firmly into the rail clamp. The column can be adjusted for height and inclination.

Holding-Releasing-Positioning-Fixing-Controlling:

6. Hold the articulated arm with one hand in the anterior segment (A) and manipulate the central handle (C) with the other hand.
7. To release turn the central handle (C) counterclockwise as far as necessary.
8. Move the articulated arm into the desired position
9. To secure, turn the central handle (C) clockwise
10. Controlling: Check that the articulated arm is firmly tightened and functioning properly.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland






CARE SURGICAL


Produktkode: CSM2649

CS Universal Arm Support™ - Extended

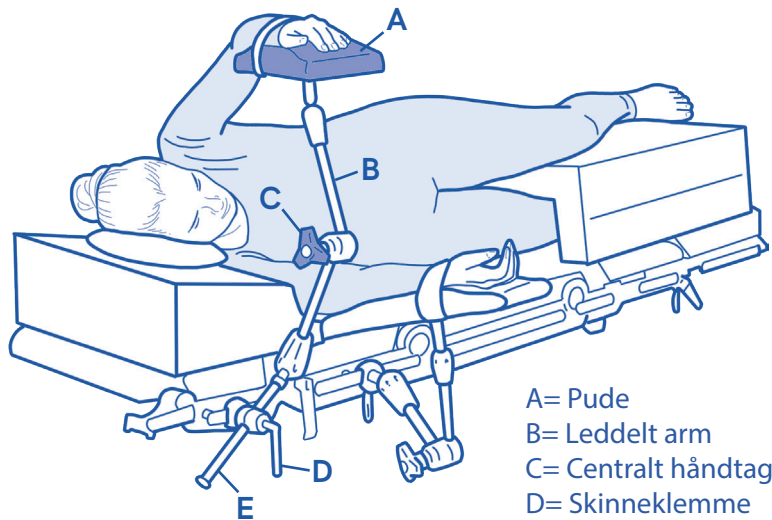

- A= Pude
B= Leddelt arm
C= Centralt håndtag
D= Skinneklemme
E= Søjle

CS Universal Arm Support - Extended; bruges til at placere patientens arm i bugleje, rygleje eller lateral position.

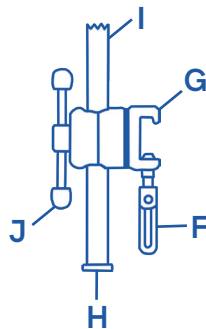

- Skinneklemmen (D):
F= Fastgørelsesskrue
G= Øvre krog
H= Stoplåg
I(E)= Søjle
J= Fastgørelsehandtag



Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



EU REP



SIKKER BORTSKAFFELSE: kunder skal overholde lokal lovgivning og bestemmelser om sikker bortskaffelse af medicinsk udstyr.



UNDLAD AT BRUGE produkter, der synes at være beskadigede eller slidte. I tilfælde af skade på et produkt eller en patient kontaktes Care Surgical.



5 060624 126499



CARE SURGICAL

Produktkode: CSM-2649

CS Universal Arm Support™ - Extended

Fastgørelse til bordet:

1. Fastgør skinneklemmen (D) til siden af operationsbordet og fastgør den ved at dreje fastgørelsesskruen (F) nedefra med uret
 2. Vær opmærksom på, at den øverste krog (G) griber fat bag skinnen under fastgørelsen. Kontroller, om skinneklemmen (D) er fastgjort sikkert og fast på sideskinnen
 3. Fjern stoplåget (H), og indsæt søjlen (I) i åbningen af den radiale indstillingsklemme.
 4. Fastgør det med fastgørelseshåndtaget (J)
- Monter stoplåget
5. Kontroller, om søjlen er fastgjort sikkert og fast i skinneklemmen. Søjlen kan justeres i højde og hældning.

Hold-Frigør-Positionering-Fastgørelse-Kontrol:

6. Hold den leddelte arm med den ene hånd i det forreste segment (A) og manipuler det centrale håndtag (C) med den anden hånd.
7. For at frigøre skal du dreje det midterste håndtag (C) mod uret så langt som nødvendigt.
8. Flyt den leddelte arm til den ønskede position
9. For at sikre skal du dreje det centrale håndtag (C) med uret
10. Kontrol: Kontroller, at ledarmen er spændt godt fast og fungerer korrekt.



Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com


Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



CARE SURGICAL


Tuotekoodi: CSM2649

CS Universal Arm Support™ - Extended

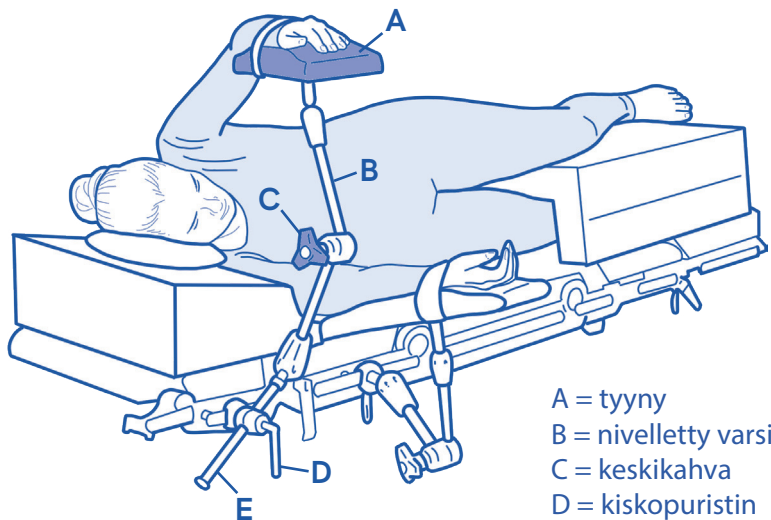

A = tyyny
B = nivelletty varsi
C = keskikahva
D = kiskopuristin
E = pylväs

CS Universal Arm Support™ - Extended
-yleiskäsivarsituki: käytetään potilaan
käsivarsien asetteluun päinmakuu-,
selinmakuu- tai kylkiasennossa.

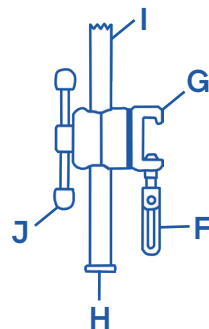

Kiskopuristin (D):

F = kiristysruuvi

G = yläkoukku

H = pysäytin

I (E) = pylväs

J = kiristyskahva



Potilaan
enimmäispaino



TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN: asiakkaiden on noudatettava paikallisia lääkinnällisten laitteiden turvallista hävittämistä koskevia lakeja ja asetuksia.



ÄLÄ KÄYTÄ tuotteita, jotka vaikuttavat vaurioituneilta tai kuluneilta. Tuotevaurion tai potilaan vamman tapauksessa ota yhteys Care Surgical -yhtiöön.



5 060624 126499



Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107

www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

EU REP



CARE SURGICAL

CS Universal Arm Support™ - Extended

Tuotekoodi: CSM2649

Kiinnittäminen pöytään:

1. Kiinnitä kiskopuristin (D) leikkauspöydän reunaan ja kiristä se kääntämällä kiristysruuvia (F) alta myötöpäivään
 2. Varmista kiinnityksen aikana, että yläkoukku (G) tarttuu kiskon taakse. Tarkista, että kiskopuristin (D) on kiinnitetty tiukasti ja tukevasti kiskon reunaan
 3. Irrota pysäytin (H) ja aseta pylväs (I) pyöreän asennuspuristimen aukkoon.
 4. Kiinnitä se kiristyskahvalla (J).
- Kiinnitä pysäytin.
5. Tarkista, että pylväs on kiinnitetty tiukasti ja tukevasti kiskopuristimeen. Pylvään korkeutta ja kallistusta voidaan säätää.

Pitäminen paikallaan – vapauttaminen – asennon valitseminen – kiristäminen – säätäminen:

6. Pitele nivellettyä vartta toisella kädellä anteriorisesta segmentistä (A) ja käytä keskikahvaa (D) toisella kädellä.
7. Vapauta kääntämällä keskikahvaa (D) vastapäivään tarvittava määrä.
8. Siirrä nivelletty varsi haluttuun asentoon.
9. Kiristä kääntämällä keskikahvaa (C) myötöpäivään.
10. Säätäminen: Tarkista, että nivelletty varsi on kiristetty tiukasti ja toimii oikein.



Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road
Burscough, L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com


Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland



CARE SURGICAL

Produktkod: CSM2649


CS Universal Arm Support™ - Extended

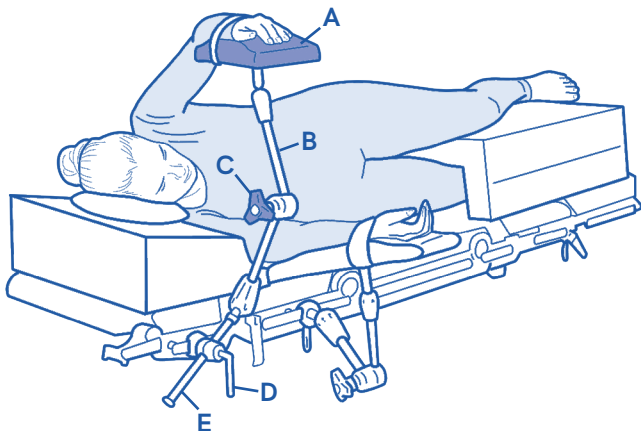

 Får endast användas av utbildade läkare. Säkerställ att produkten sitter fast innan patienten positioneras.


CS Universal Arm Support™ - Extended; används för att positionera patientens arm i bukläge, ryggläge eller sidoläge.

A = dyna
B = artikulerad arm
C = centralt vred
D = skenklämman
E = stång

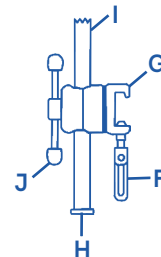

Skenklämman (D):
F = fixeringsvred
G = övre hake
H = stoppbricka
I(E) = stång
J = spännarm

Rengöringsanvisningar:

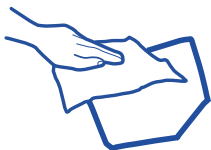

Rengör med
torkdukar avsedda för
sjukhusanvändning



Sänk inte
ned i vatten



Autoklavera inte



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland

 **SÄKER KASSERING:** Kunderna ska följa alla lokala lagar och
förfordningar för säker kassering av medicintekniska produkter.
 **ANVÄND INTE** produkter som verkar skadade eller utslitna.
I händelse av en produktskada eller patientskada,
kontakta Care Surgical.



EU REP



CARE SURGICAL

CS Universal Arm Support™ - Extended

Bilaga till tabellen:

1. Fäst skenklämman (D) på sidan av operationsbordet och säkra den genom att vrida fixeringsvredet (F) underifrån medurs
2. Se samtidigt till att den övre haken (G) greppar bakom skenan. Kontrollera att skenklämman (D) är ordentligt fixerad och sitter stadigt i sidoskenan
3. Ta av stoppbrickan (H) och för in stängen (I) i öppningen på den radiala inställningsklämman.
4. Fäst med spännarmen (J). Sätt på stoppbrickan
5. Kontrollera att stängen sitter ordentligt fast i skenklämman. Stängen kan justeras i höjdlöd och i lutning.

Hålla-Frigöra-Positionera-Fixera-Kontrollera:

6. Håll den artikulerade armen med en hand i det främre segmentet (A) och manipulera det centrala vredet (C) med den andra handen.
7. För att lossa, vrid det centrala vredet (C) moturs så lång som krävs.
8. Flytta den artikulerade armen till önskat läge
9. För att låsa, vrid det centrala handtaget (C) medurs
10. Kontrollera: Kontrollera att den artikulerade armen är ordentligt fastspänd och fungerar som den ska.



UK: Care Surgical Ltd
Unit 6 Ringtail Road,
Burscough,
L40 8JY
Tel: 01704 336671

USA: Care Surgical LLC
43 Broad Street
Suite B106, Hudson,
MA 01749, USA
Tel: 866-243-4107



www.care-surgical.com

Care Surgical Supplies Limited, Office 2, 12a Lower Main Street,
Lucan Co. Dublin, K78 X5P8 Ireland





CARE SURGICAL
Specialists in Patient Positioning